

# **NINO** nytt

Höst 2016

## **Ninolab och Elga – tillsammans i 50 år! Generösa kampanjerbjudanden!**

*Sid 8-9*

## **Vågat erbjudande**

*Sid 13*

## **Massor av nyheter!**

*Hela tidningen*

**ab ninolab**

*Din leverantör av laborieutrustning*

# Mikrovågsugn MARS 6 från CEM – För uppslutning och provberedning

CEM – pionjärer inom mikrovågsteknik för uppslutning och syntes – har under 30 års tid utvecklat och tillfört marknaden innovativa lösningar inom mikrovågsassisterad provberedning.

Deras senaste plattform MARS 6 (Microwave Assisted Reaction System) kombinerar det bästa av nydanande teknik och nya innovationer, som t.ex.:

- "One Touch"-metoder – redan inlagda metoder som endast ligger en knapptryckning bort
- Högsta säkerhet med bästa temperaturkontroll i varje enskilt kärl
- Självreglerande och återslutande högtryckskärl
- Möjlighet för upp till 40 kärl i en karusell




## Största nyheten inom mikrovågsteknik på länge! CEMs nya iWave!



Ingen fiber, inga kablar. Den mest exakta temperatursensorn! iWave är en kontaktlös temperatursensor – lika exakt som en fiberoptisk sensor. Med denna trådlösa sensor mäts temperaturen i provet – inte det omgivande kärlets temperatur

(som är fallet med IR-mätning). Mätningen sker i varje enskilt kärl. Det är som att ha en fiberoptisk sensor i varje kärl – men utan alla kablar!

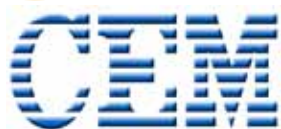

Kontakta Ralf Moberg för mer information – [rmo@ninolab.se](mailto:rmo@ninolab.se), 08-590 962 04

## Förvaring av torris/kolsyreis

Med låg avdunstning

- Robust konstruktion
- Polyuretan isolering 60-90 mm
- Låg egen vikt
- Låsbart lock
- Övertrycksventil

Som tillbehör finns:

- Hjulställ
- Kylelement




TYP	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Innervolym l	Vikt tom kg	Ca avdunstning CO2/dag, Statisk
COB 55	600	500	580	53	16	4,5
COB 130	800	600	715	138	31	7,5
COB 160	800	640	1050	150	60	8,5
COB 420	1200	800	1050	420	95	18

# Säkra och effektiva synteser/kondensering med Asynt

**CondensSyn** från Asynt är en ny unik kondensator för effektiv **reflux-kondensering** vid bl.a. syntetiska reaktioner. **CondensSyn är vattenfri** och behöver ingen vattenkylning. Detta ger en minskad miljöpåverkan och inga kostnader för vattenförbrukning. En kondensator krävs ofta vid synteser och är därför ett viktigt verktyg för forskare och kemister. Ofta används en kondensator som kräver vattenkylning och därmed ett konstant vattenflöde. Det genomsnittliga vattenflödet för en kondensator är 2 l/min vilket ger en vattenförbrukning på 2880 l/dygn. Räknat på ett års drifttid ger detta en kostnad på ca 25 000:-. Den initiala kostnaden för CondensSyn sparas alltså snabbt in!

Med över 30 års erfarenhet av tillverkning av glasvaror för forskningsändamål, har Asynt utvecklat en prisvärd luftkyld kondensator med stor effektiv area som ger en effektiv och säker kondensering. Den robusta konstruktionen i borsilikatglas är tillverkad med en ny tillverkningsteknik. Detta tillsammans med en egenutvecklad hyperbolisk design säkerställer en optimal värmeavledning när ångorna passerar längs kondensorn. CondensSyn har dessutom en unik anti-rullfunktion för att förhindra olyckor om den lämnas på laboratoriebanken. CondensSyn är lätt att rengöra och underhålla.

- Prestandan för CondensSyn är likvärdig Leibig-kondensorer som använder vattenkylning
- Ingen risk för vattenläckage
- Då inte vatten används reduceras driftkostnad och miljöpåverkan
- Enkel montering, visuell kontroll av reflux-kondenseringen samt lätt att göra ren
- Lämplig vid användning av vakuum
- Det unika CondensSyn-konceptet är patenterat och skyddas av European Community Registered Designs

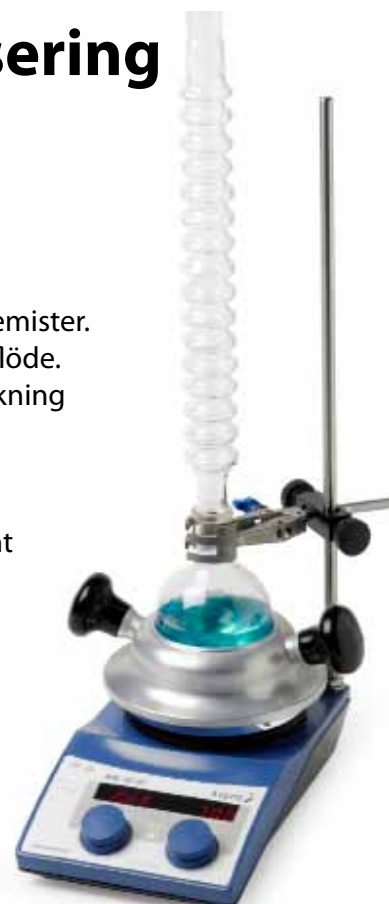

15% i rabatt!  
Pris 1 900:-/st.  
Ord. pris: 2 250:-

## Synteser utan olja med flexibla DrySyn

**DrySyn** är ett flexibelt system för kemiska reaktioner/synteser bestående av värmeblock/insatser för rundflaskor/rör som möjliggör en ren och **säker hantering utan oljebad** eller värmemantlar. Ingen kladdig olja eller risker. Med värmebeständiga handtag blir det enkelt att byta insatser. Man behöver inte ändra några applikationer vid användning av DrySyn då man använder samma värmeintervall som för oljebad.

**DrySyn Classic/Scholar, Maxi/SuperMaxi** består av ett system med värmeblock/insatser för rundflaskor i volymintervallet 50–5000 ml. Värmeblocket, som inkluderar värmeisolerande handtag, placeras på en basplatta som går att konfigurera för montering på olika typer av magnetomrörare.

**DrySyn Multi** består av ett system insatser för rundflaskor 5-100 ml och rör/vialer som placeras på en basplatta som rymmer 3 insatser. Med detta system kan alltså 3 rundflaskor eller 12 rör hanteras samtidigt.

**DrySyn Snowstorm** innebär kylning av block och insatser. Med anslutning av ett cirkulationskylbad är det enkelt att termostatera ner till temperaturer på -30°C. Passar volymer 25–1000 ml samt rör upp till en diameter av 28.2 mm.



Asynt

Kontakta Peter för mer information!

# Nya Lauda PRO ger dig den bästa temperaturkontrollen!



Helt nya Lauda PRO-serien är framtagen för de som kräver den bästa och mest pålitliga temperaturkontrollen. PRO finns med löstagbar touch-skärm och ger användaren möjlighet att styra badet på distans. PRO finns i olika modeller med temperaturområden från -100°C till +250°C.



## LAUDA

För mer information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



12% rabatt  
på PRO-serien med tillbehör!

## Hur ser (Cell)-ergonomin ut på ert lab?



- Arbetar ni med värdefulla celler?
- Är det viktigt för er verksamhet att cellerna används på ett optimalt sätt?
- Är cellernas kvalitet viktig för er verksamhet och era resultat?



AB Ninolab har lång erfarenhet av att tillhandahålla utrustning som är speciellt framtagen för cellarbeten och förvaring av celler. Vi utökar nu denna möjlighet via BioSpherix vars utrustning sätter cellernas fysiologiska behov och krav i absoluta centrum. I praktiken innebär denna produktgrupp bestående av olika inkubatorsystem att era celler ges förmånen att förvaras, odlas och bli hanterade av er som användare i en och samma konstanta miljö, utan avvikelser i någon av de parametrar som är viktiga för just era celler. Om detta låter intressant berättar vi gärna mer om vilka förutsättningar vi kan förbättra för just era celler!



Ronnie hjälper dig ta hand om dina celler på bästa sätt!

# Trygghet och övervakning via mobilen

MBraun erbjuder nu som första handskboxtillverkare möjligheten att koppla ihop handskboxen med telefonen för att på så sätt ge live-övervakning av miljön inne i handskboxen.

O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O och tryck övervakas i appen och eventuella larm syns direkt i telefonen. Detta tillsammans med "MBraun ECO-Mode" ger en trygghet och säkerhet för era prover samtidigt som handskboxen drar mindre ström och genererar mindre oljud till laboratoriet.



## Ett skakande erbjudande!



Modell MaxQ8000

MaxQ har ett stort program av skakar – analoga, digitala, för inkubering, kylda samt bänk- eller golvmodeller.

Vi ger 5 års garanti på alla skakar och livstidsgaranti på motorenheterna. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt skak till ditt laboratorium! Nu ger vi dig 15% rabatt på alla MaxQ-skakar!

15% rabatt på alla  
MaxQ-skakar!



Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-12-31

**Thermo**  
SCIENTIFIC

## Världsledande inom kontrollerade miljöer

Convicon är ett av de ledande företagen för tillverkning och installation av klimatskåp med kontrollerad miljö för växtlära, jordbruk, bioteknik, forskning och andra program.

Convicon levererar enheter från små kammare till fullskaliga växthus med anpassade lösningar, system i små nystartade företag till många av de största och mest prestigefyllda forskningsinstitutionerna i över 90 länder runt om i världen.



# Frystork med en touch av elegans!

Säker, snabb och pålitlig frystork, nu med helt ny touchscreenkontroll, du kan snabbt och enkelt läsa av t.ex. temperatur, tryck och tid. Nu ger vi dig ett riktigt bra introduktionspris!

## Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:

Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.  
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.  
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.  
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.

### Bland de många fördelarna:

- Lägst kondensortemperatur -110°C
- Integrerad vakuumentil
- Tryckreglering
- Elektrisk avisningsfunktion
- Många tillbehör

Introduktionspris

84 700:-

Ord. pris 117 600:-



NYHET!



**CoolSafe** frystorkserie består av ett stort urval modeller, från den minsta med 4 liters kondensorvolym upp till den största laboriemodellen med en volym på mer än 60 liter. Iskapaciteten går från 2,5 kg/24 timmar upp till 10 kg/24 timmar och kan uppnås med ett brett tillbehörssortiment.



För mer information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se



## Produkter för värme och klimat – Med miljön i fokus!

De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare temperatur, mindre energiförbrukning och stor driftsäkerhet.

Torkskåp, inkubatorer, klimatskåp och kylinkubatorer i flera olika modeller, inredning i rostfritt stål, inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur och mängder av andra smarta funktioner.

**Termaks**

För mer information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



6 Bästa miljön för proverna!

# Ny generation siktskakapparater från Retsch

Det tyska företaget Retsch GmbH har satt en ny standard för siktskakanalyser inom provberedning! Den nya serien siktskakapparater kombinerar enkel hantering och tillförlitliga siktanalyser med ny, fräsch design.

Siktskakapparaterna för siktar upp till 200 mm/203 mm/8" diameter finns i tre nya modeller:

**AS 200 Basic** – med digital visning av tid och effekt.

**AS 200 Digit cA** – med digital visning och kontrollerad skakamplitud.

**AS 200 Control** – kan nu ta upp till 10 st. siktar, kan lagra 99 siktprogram och har USB kontakt till sikt-skakprogrammet EasySieve, AS 200 Control kan kalibreras av Ninolabs servicetekniker.



*Snygg ny design!*

**Retsch**<sup>®</sup>  
Solutions In Milling & Sieving

**AS 300 Control** – med möjlighet att ta siktar upp till 305 mm/12" diameter har också fått en ny look och nya features.

Denna kan också kalibreras av Ninolabs servicetekniker.

De nya siktskakarna har fått en enkel och överskådlig kontrollpanel och tack vare den vibrationsupptagande konstruktionen och en optimerad kontroll av 3D-skakningarna så blir apparaten mycket tystgående.



Kontakta Ralf Moberg för mer information – [rmo@ninolab.se](mailto:rmo@ninolab.se), 08-590 962 04

## Countstar

Ett prisvärt instrument för cellräkning och klassificering av celler. Countstar har en unik design, är enkel att använda och lever upp till de högt ställda kraven i dagens forskning. 4 ljusstyper och 13 fluorescense-kombinationer och förinställda program gör att möjligheterna är många. Med Countstar får du veta mer om dina celler!

**Countstar**  
Easy Cell Analysis

För mer information

Kontakta  
Tomas Kjelsson  
08-590 962 07  
[tkj@ninolab.se](mailto:tkj@ninolab.se)



**NYHET!**



# Ninolab och Elga firar 50 år tillsammans!



Vi vill fira att vi sålt vattenreningsprodukter från Elga i 50 år, och erbjuder nu 40% rabatt på listpriserna på bland annat Purelab Flex 3!

Ultrarent vatten 18.2 MΩ-cm direkt från kranvatten till ett förmånligt pris. Kompletterad enhet från Elga med RO-membran, tank, avjonisering, UV-lampa och flexibel tapp-pistol.

- Variabelt tappflöde - från droppvis upp till 2 l/min
- Visar vattenkvalitet och TOC i real-tid direkt vid tapp
- Inställbar upptappning av volymer
- Inbyggd 7 liters tank
- Tappfilter och fotswitch finns som tillbehör

Dessutom erbjuder vi rabatt på vissa filter och tillbehör vid samtidigt köp av ultrarenare Flex 2/3 och Chorus 1.



40% rabatt på listpriset!

# ELGA

Kampanjen gäller t.o.m. 2016-12-31  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Vi erbjuder även 40% rabatt på dessa produkter:

## Flex 2

Ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller liknande

**Typiska applikationer Typ I vatten:** Elektrokemi, elektrofores, GFAAS, HPLC, IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi, mammalie-celler, plantceller och kvalitetsanalys

**Producerad vattenmängd:** <10 l/dag

**Tapphastighet:** Upp till 2 l/min

**Producerad vattenkvalitet:**

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC <5 ppb
- Bakterier <0.001 EU/ml med installerat Biofilter

## Chorus 1 Life Science

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

**Typiska applikationer:** PCR, preparering av buffert och cellkulturmedier för mammalieceller, IVF, reagenser för molekylärbiologi

**Tapphastighet:** Upp till 2 l/min

**Producerad vattenkvalitet:**

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
- Bakterier <0.1CFU/ml
- Endotoxiner <0.001 EU/ml



Flex 2

## Chorus 1 Analytical Research

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

**Typiska applikationer:** HPLC preparering, Blank prover till GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra avancerade analystekniker

**Tapphastighet:** Upp till 2 l/min

**Producerad vattenkvalitet:**

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
- Bakterier <0,1CFU/ml

## Chorus 1 General Science

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

**Typiska applikationer:** Elektrofores och elektrokemi

**Tapphastighet:** Upp till 2 l/min

**Producerad vattenkvalitet:**

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC 3-10 ppb
- Bakterier <1CFU/ml



Chorus 1



För att fira Ninolabs och Elgas långa samarbete har vi nu även specialpris på vår populäraste vattenrenare

## Option R 7 och R 15

- Recirkulerar tankvattnet för att bibehålla hög kvalitet och minimera bakteriepåväxt
- Typ II vatten
- Joner 10 - >15 MΩ-cm
- TOC <20 ppb
- Bakterier <1CFU/ml
- Som tillbehör finns tank på 25, 40 eller 75 liter



25% rabatt!

25% rabatt erbjuds inte bara på Option utan även på tank och väggmonteringsatts.

*Kampanjen gäller t.o.m. 2016-12-31  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden*

Elga erbjuder också centralvattensystem i olika storlekar!



Centra R60 och R120 har en inbyggd tank på 50 liter, samt en omvänd osmosenhet med kapaciteten 60 eller 120 liter per timme. Den inbyggda pumpen levererar 8 liter per minut ut i cirkulationssystemet. Inbyggt UV-ljus samt klar att komplettera med jonbytare för högre renhet. Ultramikrofilter för bakteriekontroll i loopen.

Centra finns också i ett större utförande med 350-liters tank, dels i version utan omvänd osmosenhet för matning från annat system, dels med inbyggd med kapaciteten 200 liter per timme.

Cirkulationspump för 18 eller 30 liter per minut. Manuellt initierad automatisk saneringsrutin och möjlighet att koppla in jonbytare.



Prata renavatten med Tomas!

# Trött på att pipettera för hand?



PIRO är en liten och smidig pipetteringsrobot som kan göra jobbet åt er! Tar minimal plats i laboratoriet och är enkel att programmera.

- 16 positioner på bordet för 12 SBS plattor och 4 rörrack
- Tar 50µl, 200µl och 1000µl spetsar
- När ned till 100 mm djup för Deep-well plattor och rör
- Kan köra 384-håls plattor utan att spetsarna tar slut
- Storlek 600x515x470 mm

NYHET!



För mer information

Kontakta  
Tomas Kjellsson  
08-590 962 07  
tkj@ninolab.se



Använder ni pipetteringsrobot? Kontakta oss för ett riktigt bra erbjudande på nya spetsar. Vi har ett brett sortiment och bra priser!

Testa oss!

För mer information

Kontakta  
Mikael Sodéus  
0707-66 72 16  
mso@ninolab.se



**Thermo**  
SCIENTIFIC

# Gnistfria kyl-/frysskåp och boxar

Behöver du förvara brandfarlig vätska på ett tryggt sätt så är Ninolux skåp och boxar det rätta valet! De har låg energiförbrukning, låg ljudnivå och är automatavfrostande. Temperaturer från +10°C till -25°C och storlekar från 91 till 485 liter.



19 384,-

Kyl 142KD



18 630,-

Frys 142FD



21 436,-

Kyl/Frys 142KFD

**ninolux**

För mer information

Kontakta  
Mikael Sodéus  
0707-66 72 16  
mso@ninolab.se



# Ultimat skydd av dina prover!

Våra frysar i 88000-serien från Thermo Forma ger dig marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, innehållsrik och intuitiv styrenhet, smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar.

Vi har representerat Forma i mer än 40 år, så vi kan kyla och vet hur du ska förvara dina prover på bästa sätt!



Lyser ett **blått** hjärta på huvudskärmen är allt som det ska. Vid **orange** hjärta måste något adresseras, som omgivningstemperatur, service, batteri etc. Ett **rött** hjärta indikerar ett allvarigare problem, som temperaturalarm, öppen dörr, bortfall av spänning eller dylikt.



På händelseloggen kan du t.ex se: Alarmstatus, dörröppningsstatus och temperaturstatus. Få en summering av omgivningstemperatur och inkommande spänning. USB-anslutning, gör det enkelt att ladda ner sparad händelsedata.

Modell	5,1 cm askar	7,5 cm askar	2 ml kryorör	Kryobankrör 1 ml
88300	300	225	30,000	50,700
88400	400	300	40,000	67,600
88500	500	375	50,000	84,500
88600	600	450	60,000	101,400
88700	700	525	70,000	118,300

Trots att utnyttjande av golvytan minskat tar 88000-serien betydligt fler prover. Detta uppnås genom vakuumisoleringsstekniken.

88000-serien finns i 5 olika storlekar!

Modell	Kapacitet liter	Kryoask Kapacitet 5,1 cm	Elanslutning	Invändiga dimensioner HxBxD	Utvändiga dimensioner HxBxD
88300V	421	300	230V/50Hz, 16A	130.11x45.16x71.86	198.1x68.6x95.5
88400V	548	400	230V/50Hz, 16A	130.11x58.74x71.86	198.1x82.2x95.5
88500V	682	500	230V/50Hz, 16A	130.11x73.03x71.86	198.1x96.5x95.5
88600V	815	600	230V/50Hz, 16A	130.11x87.31x71.86	198.1x110.8x95.5
88700V	949	700	230V/50Hz, 16A	130.11x101.60x71.86	198.1x125.1x95.5

För mer information

Kontakta  
Anders Rothman  
08-590 962 22  
aro@ninolab.se



**Thermo**  
SCIENTIFIC

## Service i egen regi!

Vi erbjuder service i egen regi. Vi utför bland annat årliga kontroller, akutservice, installationer och utbildning av brukare. Våra tekniker är fabriksutbildade specialister. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan teckna ett fördelaktigt serviceavtal för dina frysar!

Serviceavdelningen når du direkt på 08-590 962 50 eller [service@ninolab.se](mailto:service@ninolab.se)



# Ninolab + Sorvall = fantastiska priser!

## Centrifug LYNX 4000 med 1, 2 eller 3 rotorer



Max en rotor per grupp i A, B, C

### Paket 1:

LYNX 4000 med en rotor i A, B eller C

304 933:-

### Paket 2:

LYNX 4000 med två rotorer i A, B eller C

329 658:-

### Paket 3:

LYNX 4000 med tre rotorer i A, B eller C

370 865:-

### A

F10-4x1000LEX  
F12-6x500LEX  
F14-6x250y



### B

F14-14x50cy  
F20-12x50LEX  
F21-8x50y  
F23-48x1.5  
A23-6x100  
A27-8x50



### C

Bioflex HC  
Bioflex HS



## Centrifug LYNX 6000 med 1, 2 eller 3 rotorer



Tilllägg 12 000:- vid val av T29  
Max en rotor per grupp i A, B, C

### Paket 1:

LYNX 6000 med en rotor i A, B eller C

346 140:-

### Paket 2:

LYNX 6000 med två rotorer i A, B eller C

387 348:-

### Paket 3:

LYNX 6000 med tre rotorer i A, B eller C

412 072:-

### A

F9-6x1000LEX  
F10-4x1000LEX  
F12-6x500LEX  
F14-6x250y



### B

F14-14x50cy  
F20-12x50LEX  
F21-8x50y  
F23-48x1.5  
A23-6x100  
A27-8x50  
T29-8x50



### C

Bioflex HC  
Bioflex HS



För mer information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se



Prata centrifuger med Roger!

**Thermo**  
SCIENTIFIC

# För temperaturer från +300°C till +3000°C

Högtemperaturugnar och värmeskåp för laboratorier, forskning och produktion. Rörugnar och specialugnar. Carbolite har bytt namn till Carbolite-Gero och ingår numera i Verder-koncernen (där också det välkända företaget Retsch GmbH ingår).

**För att fira detta så erbjuder vi 9% rabatt på samtliga ugnar och tillbehör under resten av året!**

## Carbolite-Gero kammarugnar från 1100°C upp till 1800°C

- Stort utbud av kammarstorlekar från 3 till 23 liter
- Robust och välbeprövad design som ger lång livslängd
- Digitala kontrollenheter för styrning och loggning

## Carbolite-Gero inaskningsugnar

- Upp till 1200°C
- Förvärmning av luften för jämnare och mer effektiv inaskning
- Kammarstorlekar mellan 3-18 liter
- Inbäddade, skyddade värmeelement för lång livslängd på elementen

## Carbolite-Gero rörugnar

- Upp till 1800°C
- Delbara eller fasta rörugnar, med en eller flera kontrollerade värmezoner
- Vakuum, inert- eller reaktionsatmosfär



**CARBOLITE**  
**GERO** 30-3000°C



9% rabatt på ugnar & tillbehör!

Kontakta Ralf Moberg för mer information, [rmo@ninolab.se](mailto:rmo@ninolab.se), 08-590 962 04

# Schweiziska kvalitetsvägar till kampanjpris!

Nu ger vi dig bra rabatt på de populäraste vågarna från Precisa!

## EP220A

Kapacitet 220 g,  
läsbarhet 0,1 mg



33 480,-

Ord.pris 36 720,-

## EP2200C

Kapacitet 2200 g,  
läsbarhet 0,01 g



19 584,-

Ord.pris 21 760,-

## EP620M

Kapacitet 620 g,  
läsbarhet 1 mg



25 254,-

Ord.pris 28 060,-


## ES8200D

Kapacitet 8200 g,  
läsbarhet 0,1 g



15 795,-

Ord.pris 17 750,-

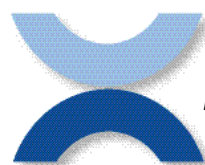

Precisa

För mer  
information

Kontakta  
Mikael Sodéus  
0707-66 72 16  
[mso@ninolab.se](mailto:mso@ninolab.se)



# Diskmaskiner och autoklaver för alla behov

Vi har vad som krävs för att hålla ditt lab rent och snyggt! Från Steelco kommer ett stort utbud av diskmaskiner för både små och stora behov samt även för djurburar/pharmaindustri. Modeller finns både med enkeldörr och som genomgångsmodeller.



LAB 1000



LAB 610



LAB 500

LAB 1000 är en av våra större labdiskmaskiner, perfekt för er som önskar större diskkapacitet.

LAB 610 är en av våra mellanstora modeller med plats för disk i upp till 5 nivåer, alt. högt gods på 1-2 nivåer.

LAB 500 är en av våra mest sålda små diskmaskiner.



Har du ännu högre krav på din disk så berättar vi gärna mer om våra pharmaidiskmaskiner!



AC1200 samt AC1400 är effektiva diskmaskiner för djurburar och flaskor som kan diska och desinficera i två nivåer. Finns även större modeller, typ tunnel-, kabinettmaskiner. Vi har även utrustning för spånhantering.

Vi har även små och större ultraljudbad från Elma i sortimentet. Finns i flera olika storlekar samt med och utan värme, för både laboratorier och industri.

För mer information

Kontakta  
Katrinn Boström  
08-590 962 21  
kbo@ninolab.se



Vi har även diskmedel till alla våra diskmaskiner!

Steelco tillverkar även autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri. Modeller finns från 90 liter till stora genomgångsautoklaver.

- Autoklaver från 90 till 1200 liter
- Tillverkade i högpolerat rostfritt stål, kammare 316 liter
- Effektiv isolering för kammare och rör
- Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
- Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning



**Steelco**



### Mindre laboratorieautoklaver

- 90 resp. 125 liter, golvstående modeller
- Finns även som bänkmödel i 95 liters utförande, med eller utan bas (underrede)
- Säkra, effektiva och pålitliga
- Stor kapacitet på liten yta
- Enkla att använda
- Utrustade med olika optioner för olika applikationer
- Inbyggd tempensensor för vätskesterilisering
- Vakuum samt snabbkylning finns som option

## Kampanj på Säkerhetsbänk Klass II



### I Premium ingår bland annat:

- Låg ljudnivå
- Tvättbar laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredje luftsensor för att mäta i er luftkanal

Premium 1200  
Säkerhetsbänk Klass II

69 900:-

Drd. pris 99 340:-

El-stativ

13 800:-

Drd. pris 24 300:-

Fast stativ

6 400:-

Drd. pris 7 440:-

*Kampanjpriser!*



LABOGENE

För mer  
information

Kontakta  
Chris Ulrici  
08-590 962 24  
cul@ninolab.se



# B



## Skräddarsydda renluftslösningar- ninoLAF

Ninolaf säkerhetsbänkar och dragskåp för isotophantering är konstruerade och byggda i Sverige för skandinaviska behov och konfigureras helt efter det unika behovet hos den enskilde beställaren. Ninolaf säkerhetsbänkar och dragskåp för isotophantering kan förses med strålskydd i rygg, sidor och botten upp till 50 mm blyekvivalent, och har lätt skjutbart strålskydd i fronten med stort blyglasfönster för bästa tänkbara sikt in i bänken.



# ninolaf

Vi erbjuder skräddarsydda renluftslösningar med installation och valideringsservice. Förutom tillverkningen enligt kundernas önskemål finns även ett antal standardprodukter på sortimentet såsom Luftduschar, LAF-tak med och utan personskydd, fasta och mobila Burbytesstationer, Genomräkningskåp, Kemslossar och Isotopbänkar.

Nino Labinteriör AB (en del i Ninolabgruppen) utvecklar, designar och tillverkar produkterna under varumärket ninoLAF och har sitt säte i Kungsbacka strax söder om Göteborg.