

asecos®

Selection

FÖRVARING AV FARLIGA ÄMNINGEN

HÖGSTA KVALITET MADE IN GERMANY



ICONS

asecos produktkategorier

Service



Viktig information

Farosymboler



Brandfara



Toxicitet/
Irritation



Giftigt



Frätande



Frätande
(betingad)



Miljöfarlig



Komprimerade
gaser

Egenskaper



Typ



GS godkänd



Standard för
laboratoriein-
redning



CE deklara-
tion



FM godkänd



asecos
garanti



Bredd



Special djup



Höjd



Flygeldörr



Flygeldörr med
fönster



Flygeldörr med
gångjärnsförsett
fönster



Flygeldörr med
ventilations-
öppningar



Vikdörr



Sensorstyra
helautomatiska
vikdörrar



Draglåda



Dörrstopp



Automatisk
dörrstängning



Dubbeldörr
som öppnas
med en hand



Cylinderlås



Proficylinderlås



med låsindi-
kator



Justeringshjälp-
medel



Transportsockel



Hjul med
sockel



Ventilations-
öppningar



Vertikal
mellanvägg



Horisontal
mellanvägg



Hylla



Brick-hylla



Metall-fri
brick-hylla



Låda



Utdragbar hylla



Maximal inre
höjd



Typ 30 säker-
hetsbox



Vägg
montage



Hyllsystem



Komfort
rullramp



Perforerad yta



Hel yta



Teknisk
ventilation kan
erhållas



Återcirkuleran-
de luftfilter



Material:
Polyethylen



Kapacitet



Förvaringskapa-
citet fat



Förvaringskapa-
citet
IBC/KTC



Transportabla
vagnar



Flyttbar
vanna

asecos Garanti***



** I fall årlig driftsättning av PREMIUM Q-tariffen eller
slutsats av ett motsvarande avtal



* Vid slutet av ett 5-årigt BASICPlus avtal

*** Garanti vänd dig till din lokala återförsäljare

asecos

Maximal trygghet för dig

Äventyra inte lagring av farliga ämnen.
Förlita dig på den nyaste teknologin.

Namnet asecos står för trygghet och ekologi- för säkerhet och skyddande av miljön då vi handskas med farliga ämnen.

Sedan asecos grundades år 1994 har företaget haft en betydande inflytande på hur lagring av farliga ämnen sker. Asecos har direkt från början satt en ny nivå för säkerhet genom att introducera Typ 90 teknologin för säkerhetsskåp. Tack vare denna teknologi och frekvent innovation ses asecos nu som den ledande tillverkaren av säkerhetsskåp i Europa. Vi är stolta att få introducera mer än 1,200 produkter för ökad säkerhet, flexibilitet och lämplighet i dagligt arbete med farliga ämnen.

Fastän det finns andra standarder för säkerhetsskåp, representerar Typ 90 teknologin enligt EN 14470 högsta "state of the art". För övrigt är EN 14470 den enda standarden som garanterar en specifikt definierad säkerhetstid för personal och räddningspersonal i händelse av brand.

I utformningen av ett pålitligt brandskydd måste hänsyn tas till alla aspekter för att förebygga brand. Nödkorridorer bör hållas fria och spridningen av brand måste förhindras så att räddningstjänstens åtgärder kan börja så snabbt och effektivt som möjligt. Det yttersta målet är att skydda liv och hälsa av alla människor inne i byggnaden. Lika viktigt är det att hålla byggnadsskador till ett minimum och förhindra funktions stillståndstid och produktions förluster. Den ekonomiska inverkan av en brand leder oftast företag till bekymmer som måste ifrågasättas.

Det 90 minuters brandresistenta skåpet uppfyller

enligt EN 14470 alla dessa kriterier utan förhinder eller ytterligare krav med tanke på strukturen av byggnaden.

Väsentliga fördelar med brandsäkra typ 90 skåp:

- Inga restriktioner brandfarlig vara per arbetsyta
 - Fristående brandsäkerhet upp till 90 minuter ; inga tilläggs brandåtgärder behövs.
 - Inga säkerhetskannor behövs
 - Inga föroreningar av lösningsmedel
 - Inga dekanteringsarbeten - inga ytterligare explosionsrisker
 - Skåpen erbjuder "state of the art" skydd (försäkring, personal och skydd)
 - Maximal installations flexibilitet. När applikationer ändras kan skåpen lätt tilläggas eller tas bort utan arkitektoniska ändringar (brandsläcknings system, eld förhindrande väggar etc.)
- asecos har gjort en Farligt Gods Guide om lagring av farliga ämnen och varor. Den ger en mycket bred inblick i ämnet och poängterar detaljerna i EN 14470. Du kan beställa denna broschyr på vår hemsida:

www.asecos.com/catalogues

På följande sidor kommer du att hitta en vald samling av asecos produkter för de vanligaste lagringssituationerna. Om du inte kan hitta den rätta produkten var god och besök våra hemsidor eller se i vår huvudkatalog.



asecos

Provad säkerhet som du kan förlita dig på

Våra produkters kvalitet och trygghet är erkända och godkända av alla ledande institut. Produkterna är tillverkade av asecos och står för maximal trygghet och kvalitet.



Våra säkerhetsskåp brinner för säkerhetens skull

Varenda enskild modell av våra brand-säkra skåp måste framgångsrikt provas i en brandkammare av ett oberoende materialprovnings laboratorium. De prövas alltså enligt de stränga kraven i den europeiska standarden EN 14470 del 1 eller 2 för att visa skåpens typklass.

Trygghet i daglig användning

Asecos säkerhetsskåp är provade enligt de säkerhets krav, som är aktuella. Med ett framgångsrikt godkännande av GS testing har asecos produkter blivit dokumenterade och certifierade som högvärdiga och långlivade av en oberoende organisation. GS-provprogrammet gäller sedan 31.12.2012. GS-märket beviljas endast i fall där till exempel produkterna har undergått en kontinuerlig mekanisk provning på 50.000 cyklar utan skada. Asecos säkerhetsskåp har klarat av provningen med framgång utan svårigheter.

Pågående kvalitetskontroll

Produktionen av asecos säkerhetsskåp är frivilligt och permanent övervakat av en ackrediterad och oberoende materialprovnings institut. Utan förvarning, kan säkerhetsskåp tas från pågående produktionsprocess och provas i brandkammare.

En pålitlig partner i varje avsende

År 2014 har asecos GmbH ännu en gång blivit belönat med det kreditvärldiga "CrefoZert" priset. Priset beviljades av det ledande ratingbolaget Creditreform Hanau Leibrock KG.

Enastående kvalitetsstyrning

Vår certifierade kvalitetsstyrningssystem överensstämmer med den internationella standarden ISO 9001 och därmed visat att kvalitetsorienteringen av varje delprocess av Asecos bekräftar företagets filosofi och all verksamhet.

Ventilation - skydd och trygghet på arbetet

Asecos har i över 20 år tillverkat ventilations utrustning för jobb med farliga ämnen. Alla asecos arbetsplatser där hantering av farliga ämnen förekommer, har på basis av den tyska (e.g. DIN 12924-1) och andra europeiska standarder (e.g. EN 14175-3 Para. 5.4.4) blivit noggrant provade. Asecos erbjuder också inom ventilations och säkerhetsskåps branchen en bred och ständigt växande variation av lösningar. Asecos stora variaton av produkter stöds av framstående institut, som infraseriv Höchst, Institut für Industriaerodynamik (IFI), Tintschl Engineering och flera andra från utveckling av den perfekta lösningen till serie produktion av certifierade produkter.





Översikt

Lagring av brandfarliga ämnen	 ICKE LÄMPLIG SÄKERHETS BEHÅLLARE OBLIGATORISKT	 ENDAST FÖRVARING AV FABRIKSFÖRSLUTNA BEHÅLLARE	  LÄMPLIG INGA BEGRÄNSNINGAR
Isolering	INGEN ISOLERING	ISOLERING SKÅPETS BAK- SIDA	BRANDRESISTENTA VÄGGAR
Certifiering	INGEN	TESTAD ENLIGT TESTMETOD SP 2369 KLAS 1	EN 14470-1
Brandskydd (minuter)	 0	 Ungefär 30	 30  90
Risk för katastrof	MYCKET HÖG	MEDIUM	LÅG INGEN
Legala konsekvenser och personligt ansvar			ENGS FM 
	INGEN SÄKERHET             	MAXIMAL SÄKERHET	

Q PEGASUS



- AGT - bekväm hantering**
- en hand öppnar skåpets två dörrar - dra endast i det högra handtaget
 - och som av magi öppnas även den vänstra dörren
 - behållaren kan tryggt hanteras



- DÖRRÖPPNINGS STOPPSYSTEM- användarvänlig och trygg**
- dörrar stannar lätt
 - bekväm och säker hantering när behållare sätts in eller tas ut



- Har behållare blivit avlägsnade eller lagrade?**
Känn dig välkommen att gå tillbaka till din arbetsplats - skåpet sköter resten!



- TSA – alltid stängda dörrar**
- dörrar stängs automatiskt och tryggt
 - frigörare stänger dörrarna automatiskt efter ca 60 sekunder
 - akustisk och visuell tecken före stängandet
 - Inga mer problem med öppet lämnade dörrar!



PHOENIX

PHOENIX Vol.2

Vikbara dörrar är den bästa lösningen då utrymmen är knappa, t.ex. i laboratorier. Det gör det möjligt att passera skåpet då dörrarna är helt öppna. Dessutom är vikdörrar möjliga med en-hands-hantering (S-PHOENIX Vol. 2-90) och även med hel- automatiserade dörrar, inkluderar en sensor detektor (S-PHOENIX touchless-90).

En verklig fördel med tanke på tryggheten i att hålla i en behållare med båda händerna i alla situationer.

Ungefär 20%

mer utrymme framför skåpen då dörrarna öppnas, i förhållande till säkerhetsskåp med flygeldörrar.

Ungefär 90%

av hela lagringsutrymmet är synligt och tillgängligt då vikdörrarna är öppnade.



SÄKER LAGRING AV ICKE BRANDFARLIGA KEMIKALIER

SL-LINE

Lagring av frätande kemikalier

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC

Säker lagring av gifter, vattenförorenande ämnen och lätt frätande kemikalier

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk

Separat lagring av gifter, vattenförorenande ämnen och lätt frätande kemikalier i ett skåp







Skåp för syror och baser
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 12 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30606-001-30608



Skåp för syror och baser
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 8 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30606-001-30607



Skåp för syror och baser
SL-CLASSIC modell SL.196.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30612-001-30615



Skåp för syror och baser
SL-CLASSIC modell SL.196.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30612-001-30614

Trygg och erkänd lagring av aggressiva, icke brandfarliga, riskabla ämnen /varor material i arbetsområden

- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Två hermetiskt åtskilda förvaringsfack
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem med endast ett frånlufts-uttag
- Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning


- Draghylla med plastsump som kan tas ut ur skåpet

Draghylla
hög kvalitet och robust konstruktion
plastsump som kan tas ut ur skåpet

Beställnings nr. 30609



Teknisk data		SL.196.120.MV	SL.196.060.MH
Yttre mått B x D x H	mm	1197 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965
Inre mått B x D x H	mm	alla komponenter: 485 x 570 x 1869	övre del: 485 x 570 x 914 nedre del: 485 x 570 x 833
Djup med öppna dörrar	mm	1153	1119
Vikt utan inredning	kg	160	125
Extraktionsluft	NW	75	75
Luftflöde 30 gånger	m³/h	16	8
Tryckförlust (vid 30 luftbyten)	Pa	56	40
Maximal last	kg	300	300
Ytlast	kg/m²	240	444
Kapacitet plast sump	Liter	11,00	11,00
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	25	25

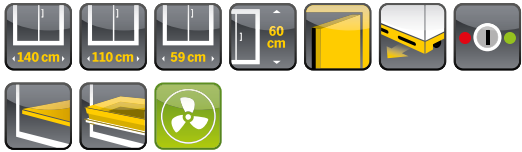

Underbänkskåp för syror/baser
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.140.UB.3T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30616-001-30618

inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30616-001-30617



Underbänkskåp för syror/baser
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.110.UB.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30619-001-30620



Underbänkskåp för syror/baser
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.110.UB.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30619-001-30621



Underbänkskåp för syror/baser
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.059.UB.T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30622-001-30625

inredning med 1 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30622-001-30624

Trygg och erkänd lagring av aggressiva, icke brandfarliga, riskabla ämnen /varor material i arbetsområden

- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Två separata lagringsutrymmen (modell SL.060.140.UB.3T och modell SL.060.110.UB.2T)
- SL-CLASSIC-UB (höjd 80 cm): Skåpet är tillverkat av special melaminharts plattor i ljusgrått, SL-CLASSIC (höjd 196 cm): Skåp tillverkad av stålplåt, Ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem med endast ett frånlufts-uttag
- Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet

Flygeldörr

- 135° öppning av flygeldörrar
- Dörrarna låsbara med cylinderlås och låsindikator

Transport

- Hjul sockel som tillval

Standardinredning

- Draghylla med plastsump som kan tas ut ur skåpet



stabil –lätt att flytta på skåpet
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)


gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30374
SL.060.140.UB.3T

Beställnings nr. 30362
SL.060.110.UB.2T

Beställnings nr. 30478
SL.060.059.UB.T

Teknisk data		SL.060.140.UB.3T	SL.060.110.UB.2T	SL.060.059.UB.T
Yttre mått B x D x H	mm	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	590 x 570 x 600
Inre mått B x D x H	mm	vänster: 489 x 531 x 562 central: 489 x 531 x 562 höger: 281 x 531 x 562	alla komponenter: 489 x 531 x 562	488 x 531 x 562
Djup med öppna dörrar	mm	1094	1094	1112
Vikt utan inredning	kg	80	60	40
Extraktionsluft	NW	50	50	50
Luftflöde 30 gånger	m³/h	9	9	4
Tryckförlust (vid 30 luftbyten)	Pa	10	10	5
Maximal last	kg	100	100	100
Ytlast	kg/m²	82	93	151
Kapacitet draghylla	Liter	11	11	11

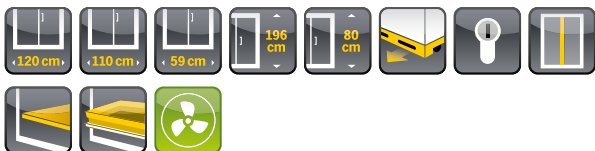

Skåp för syror och baser
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV.WDC
ljusgrått (RAL 7035)/ljusgrått (RAL 7035), inredning med 8 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32662-001-30607



Skåp för syror och baser
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV.WDC
ljusgrått (RAL 7035)/ljusgrått (RAL 7035), inredning med 12 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32662-001-30608



Underbänkskåp för syror/baser
SL-CLASSIC-UB modell SL.080.110.UB.2TC
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32659-001-30621
inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32659-001-30620



Underbänkskåp för syror/baser
SL-CLASSIC-UB modell SL.080.059.UB.TCR
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32660-001-30625
inredning med 1 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32660-001-30624

Trygg och erkänd lagring av aggressiva, icke brandfarliga, riskabla ämnen /varor material i arbetsområden

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetsselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Två separata lagringsskåp (modell SL.080.110.UB.2TC och modell SL.196.120.MV.WDC)
- SL-CLASSIC-UB (höjd 80 cm): Skåpet är tillverkat av special melaminharts plattor i ljusgrått, SL-CLASSIC (höjd 196 cm): Skåp tillverkad av stålplåt, Ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem med endast ett frånlufts-uttag
- Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet

Flygeldörr

- Dörrar stänger automatiskt med en intergrerad dörrstängare
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- Draghylla med plastsump som kan tas ut ur skåpet



Hjul med sockel (H=30 mm)

gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30362

SL.080.110.UB.2TC

Beställnings nr. 30748

SL.080.059.UB.TCR

Draghylla

hög kvalitet och robust konstruktion
plastsump som kan tas ut ur skåpet

Beställnings nr. 30609

Alla modeller



Teknisk data		SL.196.120.MV.WDC	SL.080.110.UB.2TC	SL.080.059.UB.TCR
Yttre mått B x D x H	mm	1200 x 605 x 1970	1100 x 570 x 800	590 x 570 x 800
Inre mått B x D x H	mm	1075 x 565 x 1865	alla komponenter: 1000 x 530 x 760	490 x 530 x 760
Djup med öppna dörrar	mm	1153	1094	1112
Vikt utan inredning	kg	162	73	48
Tryckförlust (vid 30 luftbyten)	Pa	56	10	5
Luftflöde 30 gånger	m³/h	16	9	6
Maximal last	kg	300	300	100
Ytlast	kg/m²	240	100	159
Kapacitet draghylla	Liter	11,00	11,00	11,00



med
recirkulerande luftfiltersystem

**Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke
brandfarliga vådliga substanser i på arbetsplatsen**

Skåp

- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetsselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Mellanvägg - ett skåp med två olika inredningar
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem med endast ett frånlufts-uttag
- Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Recirkulerande luftfiltersystem

- Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 dB (A)
- Med flerstegsfilter
- VDE godkänd övervakningselektronik med övervakning av filter och avluftning
- Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
- Skärm med innovativ pekplatta
- Manuell kontroll av filtermättnad

Standardinredning

- Vänster / övre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
- Höger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)



med
recirkulerande luftfiltersystem



Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljövänlig på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut
med multifas filtersystem

Beställnings nr. 32952

SLX.230.120.MV

Beställnings nr. 32953

SLX.230.060.MH

Draghylla

hög kvalitet och robust konstruktion
plastsump som kan tas ut ur skåpet

Beställnings nr. 30609



Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 " grafisk display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detalljer



Recirkulerande luftfilterskåp
SLX-CLASSIC modell SLX.230.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 12 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32936-001-30608



Recirkulerande luftfilterskåp
SLX-CLASSIC modell SLX.230.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 8 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32936-001-30607



Recirkulerande luftfilterskåp
SLX-CLASSIC modell SLX.230.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32939-001-30615



Recirkulerande luftfilterskåp
SLX-CLASSIC modell SLX.230.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32939-001-30614

Teknisk data		SLX.230.120.MV	SLX.230.060.MH
Yttre mått B x D x H	mm	1197 x 615 x 2300	600 x 615 x 2300
Inre mått B x D x H	mm	alla komponenter: 485 x 565 x 1865	alla komponenter: 485 x 565 x 914
Vikt utan inredning	kg	195	152
Maximal last	kg	300	300
Ytlast	kg/m²	204	363
Frekvens	Hz	50	50
Nominal spänning	V	230	230
Max. strömförbrukning	A	0,5	0,5
Strömförbrukning i på-läge	W	120	120
Strömförbrukning i standby-läge	W	50	50



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC modell CS.195.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30495-041-30508
Beställnings nr. 30496-041-30508 (ljusgrått, med fönster)
Beställnings nr. 30495-040-30508 (varningsgul)
Beställnings nr. 30496-040-30508 (varningsgul, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC-G modell CS.195.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30496-041-30516
Beställnings nr. 30495-041-30516 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30496-040-30516 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30495-040-30516 (varningsgul)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC modell CS.110.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30492-040-30498
Beställnings nr. 30493-040-30498 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30492-041-30498 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30493-041-30498 (ljusgrått, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC-G modell CS.110.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30492-040-30506
Beställnings nr. 30493-040-30506 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30492-041-30506 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30493-041-30506 (ljusgrått, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC modell CS.195.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30495-040-30518
Beställnings nr. 30496-040-30518 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30495-041-30518 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30496-041-30518 (ljusgrått, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC-G modell CS.110.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30493-041-30507
Beställnings nr. 30492-041-30507 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30492-040-30507 (varningsgul)
Beställnings nr. 30493-040-30507 (varningsgul, med fönster)

Trygg och ordentlig lagring av icke brandfarliga kemikalier och gifter i arbetsomgivningar

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med lång livslängd, skåpet är gjort av stålplåt med höggradig lackering
- Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Naturlig ventilation genom ventilationsöppningar vid botten av skåpet dörrarna
- Minskning av lukter inuti skåpet
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Dörrar tillgängliga med glaspanel
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integrerad i dörrskafet)

Standardinredning

- 2 eller 3 hyllor, perforerad insats och bottenvanna
- 2, 3, 4 eller 6 draghyllor med borttagbara plast sumpar

Färger tillgängliga



Teknisk data		CS.195.105(WDFW)
Yttre mått B x D x H	mm	1055 x 520 x 1950
Inre mått B x D x H	mm	996 x 493 x 1835
Vikt utan inredning	kg	75
Maximal last	kg	600
Ytlast	kg/m²	421
Extraktionsluft	NW	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	2
Kapacitet botten sump	Liter	33
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	100

Teknisk data		CS.110.105(WDFW)
Yttre mått B x D x H	mm	1055 x 520 x 1105
Inre mått B x D x H	mm	996 x 493 x 990
Vikt utan inredning	kg	48
Maximal last	kg	400
Ytlast	kg/m²	279
Extraktionsluft	NW	75
Luft ändring 10 times	m³/h	5
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1
Kapacitet draghylla	Liter	34,00
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	30



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC modell CS.195.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30561-040-30573
Beställnings nr. 30563-040-30573 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30561-041-30573 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30563-041-30573 (ljusgrått, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC-G modell CS.195.054.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr med glapanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30563-041-30579
Beställnings nr. 30561-041-30579 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30563-040-30579 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30561-040-30579 (varningsgul)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC modell CS.110.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30557-040-30565
Beställnings nr. 30559-040-30565 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30557-041-30565 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30559-041-30565 (ljusgrått, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC modell CS.110.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30557-041-30571
Beställnings nr. 30559-041-30571 (ljusgrått, med fönster)
Beställnings nr. 30557-040-30571 (varningsgul)
Beställnings nr. 30559-040-30571 (varningsgul, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC modell CS.195.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30561-040-30581
Beställnings nr. 30563-040-30581 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30561-041-30581 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30563-041-30581 (ljusgrått, med fönster)



Skåp för kemikalier
CS-CLASSIC-G modell CS.110.054.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr med glapanel i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30559-040-30572
Beställnings nr. 30557-040-30572 (varningsgul)
Beställnings nr. 30557-041-30572 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30559-041-30572 (ljusgrått, med fönster)

Trygg och ordentlig lagring av icke brandfarliga kemikalier och gifter i arbetsomgivningar

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med lång livslängd, skåpet är gjort av stålplåt med höggradig lackering
- Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Naturlig ventilation genom ventilationsöppningar vid botten av skåpet dörrarna
- Minskning av lukter inuti skåpet
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Dörrar tillgängliga med glaspanel
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integrerad i dörrskaftet)

Standardinredning

- 2 eller 3 hyllor, perforerad insats och bottenvanna
- 2, 3, 4 eller 6 draghyllor med borttagbara plast sumpar

Färger tillgängliga



Teknisk data		CS.195.054(WDFW)
Yttre mått B x D x H	mm	545 x 520 x 1950
Inre mått B x D x H	mm	486 x 493 x 1835
Vikt utan inredning	kg	51
Maximal last	kg	600
Ytlast	kg/m²	786
Extraktionsluft	NW	75
Luft ändring 10 times	m³/h	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1
Kapacitet botten sump	Liter	22
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	50

Teknisk data		CS.110.054(WDFW)
Yttre mått B x D x H	mm	545 x 520 x 1105
Inre mått B x D x H	mm	486 x 493 x 990
Vikt utan inredning	kg	31
Maximal last	kg	400
Ytlast	kg/m²	520
Extraktionsluft	NW	75
Luft ändring 10 times	m³/h	2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1
Kapacitet draghylla	Liter	15,00
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	30



med
recirkulerande luftfiltersystem



Recirkulerande luftfilterskåp
CX-CLASSIC-G modell CX.229.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 32925-041-30508



Recirkulerande luftfilterskåp
CX-CLASSIC-G modell CX.229.081.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 32929-041-30542



Recirkulerande luftfilterskåp
CX-CLASSIC-G modell CX.229.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 32925-041-30518
Beställnings nr. 32925-041-30516 (ljusgrått, 4 x draghylla)



Recirkulerande luftfilterskåp
CX-CLASSIC-G modell CX.229.081.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 32929-041-30548
Beställnings nr. 32929-041-30550 (ljusgrått, 6 x draghylla)

**Trygg och godkänd lagring av vattenförorenande ämnen, icke brandfarliga vätskor och gifter i arbetsomgi-
ngen enligt TRGS 510**

Skåp

- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med lång livslängd, skåpet är gjort av stålplåt med höggradig lackering
- Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Naturlig ventilation genom ventilationsöppningar vid botten av skåpet dörrarna
- Minskning av lukter inuti skåpet
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr med glaspanel

- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integrerad i dörrskaftet)

Recirkulerande luftfiltersystem

- Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 dB (A)
- Med flerstegsfilter
- VDE godkänd övervakningselektronik med övervakning av filter och avluftning
- Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
- Skärm med innovativ pekplatta
- Manuell kontroll av filtermättnad

Standardinredning

- 3 hyllor, perforerad insats och bottenvanna
- 4 eller 6 utdragbara hyllor med borttagbara plastsumpar

med
recirkulerande luftfiltersystem



Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljövänlig på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut
med multifas filtersystem

Beställnings nr. 32952
CX.229.105.WDFW

Beställnings nr. 32953
CX.229.081.WDFW



Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 " grafisk display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detaller

Teknisk data		CX.229.105.WDFW	CX.229.081.WDFW
Yttre mått B x D x H	mm	1055 x 520 x 2290	810 x 520 x 2290
Inre mått B x D x H	mm	996 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835
Vikt utan inredning	kg	105	93
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	440	563
Frekvens	Hz	50	50
Nominal spänning	V	230	230
Max. strömförbrukning	A	0,5	0,5
Strömförbrukning i på -läge	W	120	120
Strömförbrukning i standby- läge	W	50	50

SÄKER LAGRING AV BRANDFARLIGA OCH ICKE BRANDFARLIGA KEMIKAlier


Säker lagrings nivå- 30 minuter

För Säkerhetsaspekter och Säkerhetskrav se

EXPERT INFORMATION

Jämförelse av säkerhets förvaringsskåp för brandfarliga ämnen

I dag används brandfarliga ämnen i de flesta laboratorie- och industrimiljöer. Felaktig lagring av dessa material innebär en stor risk för människor och egendom. Fast det finns ett stort utbud av förvaringsskåp för brandfarliga ämnen på marknaden, är det ofta en utmaning för kunderna att hitta den perfekta produkten som passar deras specifika tillämpning eller situation. Denna broschyr är avsedd att hjälpa förstå fördelar och nackdelar av de olika standarderna och hjälper att fatta rätt beslut för en säkrare arbetsplats.

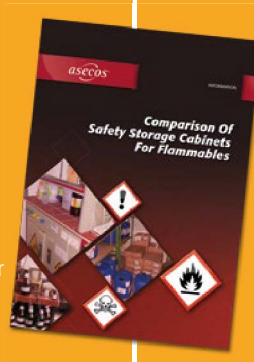

Kontakta oss på info@asecos.com och få ett gratis exemplar nu!



SKÅP CERTIFIERADE ENLIGT

EN 14470-1 (Typ 30)

EN 14727 (Laboratiemöbler)

Produktsäkerhetslag (GPSG) - GS Mark

.....

30





Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-060-33637



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-061-33637



OBSERVERA

**STORT LAGRINGS
KAPACITET**

**UNIKT PRIS
PRESTANDA**

Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.086.WD
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31008-060-33624
Beställnings nr. 31008-061-33624 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.056
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31002-060-33603
Beställnings nr. 31002-061-33603 (ljusgrått)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandskydd i 30 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, dörr framtill med reptålig färglack
- Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörr i varningsgul (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr

- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)

Färger tillgängliga



Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt,
pulverlackerad RAL 7035,
för bottenvanna

Beställnings nr. 5555
Q30.195.056

Beställnings nr. 11165
Q30.195.086

Beställnings nr. 5536
Q30.195.116



Basskydd

Beställnings nr. 31923
Q30.195.056

Beställnings nr. 31924
Q30.195.086

Beställnings nr. 31925
Q30.195.116



Q-Mover

för lätt transport av
breda skåp igenom normala
rumsdörrar

Beställnings nr. 30037



Teknisk data		Q30.195.116	Q30.195.086.WD	Q30.195.056
Yttre mått B x D x H	mm	1164 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626
Djup med öppna dörrar	mm	1153	1394	1094
Vikt utan inredning	kg	240	195	146
Extraktionsluft	NW	75	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9	6	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	10	10	10
Maximal last	kg	600	600	600
Ytlast	kg/m²	445	568	816
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	75	75
Kapacitet botten sump	Liter	33	22	22
Transportsockel				
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	1012	788	412



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-060-33649
Beställnings nr. 31003-061-33649 (ljusgrått, 6 x draglåda)

Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-061-33647
Beställnings nr. 31003-060-33647 (varningsgul, 4 x draglåda)

OBSERVERA

STORT LAGRINGS KAPACITET

UNIKT PRIS PRESTANDA

Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.086.WD
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31008-060-33627
Beställnings nr. 31008-061-33627 (ljusgrått, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 31008-060-33629 (varningsgul, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 31008-061-33629 (ljusgrått, 6 x draglåda)

Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.056
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31002-061-33610
Beställnings nr. 31002-060-33610 (varningsgul, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 31002-061-33608 (ljusgrått, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 31002-060-33608 (varningsgul, 4 x draglåda)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandskydd i 30 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, dörr framtill med reptålig färglack
- Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörr i varningsgul (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr

- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 4 eller 6 utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)

Färger tillgängliga



Basskydd

Beställnings nr. 31923
Q30.195.056

Beställnings nr. 31924
Q30.195.086

Beställnings nr. 31925
Q30.195.116



Plastbricka för utdragbar låda

tillverkat av PP, grå eller vit

Beställnings nr. 10054
Q30.195.056

Beställnings nr. 18472
Q30.195.086

Beställnings nr. 27948
Q30.195.116



Teknisk data		Q30.195.116	Q30.195.086.WD	Q30.195.056
Yttre mått B x D x H	mm	1164 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626
Djup med öppna dörrar	mm	1153	1394	1094
Vikt utan inredning	kg	240	195	146
Extraktionsluft	NW	75	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9	6	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	10	10	10
Maximal last	kg	600	600	600
Ytlast	kg/m²	445	568	816
Kapacitet draglåda	Liter	30,00	19,00	4,00
Transportsockel				
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	1012	788	412



Säkerhetsskåp
Q-DISPLAY-30 modell Q30.195.086.WDFW
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32781-061-33629
Beställnings nr. 32781-060-33629 (varningsgul)

Säkerhetsskåp
Q-DISPLAY-30 modell Q30.195.086.WDFW
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32781-061-33624
Beställnings nr. 32781-060-33624 (varningsgul)

OBSERVERA

**STOR LAGRINGS-
KAPACITET**

**EN SNABB BLICK
PÅ LAGRADE
VAROR**

Säkerhetsskåp
Q-DISPLAY-30 modell Q30.195.086.WDFW
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32781-061-33627
Beställnings nr. 32781-061-33627 (ljusgrått)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandskydd i 30 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratiemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, dörr framtill med reptålig färglack
- Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr med glasutsnitt

- Dörr med brandresistent glas EI 30 enligt DIN EN 13501-2
- Sparar tid, inget onödigt sökande efter material som behövs
- Vådliga ämnen synliga då dörrarna är stängda
- Idealisk för att installeras i butiker eller i förrådsutrymmen
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
- 4 eller 6 draglådor (stålplåt pulverlackerad)

Basskydd

Beställnings nr. 31924



Plastbricka för utdragbar låda

tillverkat av PP, grå eller vit

Beställnings nr. 27948



Teknisk data		Q30.195.086.WDFW	Q30.195.086.WDFW
Yttre mått B x D x H	mm	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947
Inre mått B x D x H	mm	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626
Djup med öppna dörrar	mm	1394	1394
Vikt utan inredning	kg	212	212
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	6	6
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	10	10
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	531	531
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	
Max. last draglåda	kg		60
Kapacitet botten sump	Liter	22	
Kapacitet draglåda			1000276074
Transportsockel			
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	788	788

SÄKER FÖRVARNING AV BRANDFARLIGA OCH ICKE BRANDFARLIGA KEMIKA-LIER


Säker lagringsnivå 90 minuter

För Säkerhetsaspekter och Säkerhetskrav se

EXPERT INFORMATION

Jämförelse av säkerhets förvaringsskåp för brandfarliga ämnen

I dag används brandfarliga ämnen i de flesta laboratorie- och industrimiljöer. Felaktig lagring av dessa material innebär en stor risk för människor och egendom. Fast det finns ett stort utbud av förvaringsskåp för brandfarliga ämnen på marknaden, är det ofta en utmaning för kunderna att hitta den perfekta produkten som passar deras specifika tillämpning eller situation. Denna broschyr är avsedd att hjälpa förstå fördelar och nackdelar av de olika standarderna och hjälper att fatta rätt beslut för en säkrare arbetsplats.

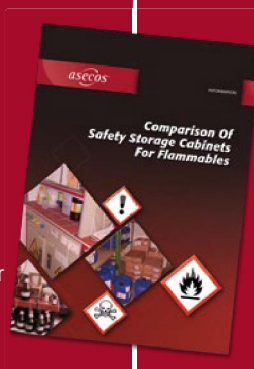

Kontakta oss på info@asecos.com och få ett gratis exemplar nu!



SKÅP CERTIFIERADE ENLIGT

EN 14470-1 (Typ 90)



EN 14727 (Laboratiemöbler)

Produktsäkerhetslag (GPSG) - GS Mark

.....



90

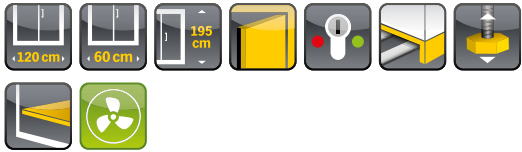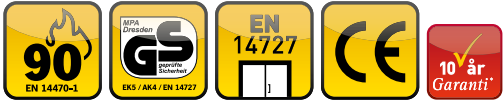

Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-040-33637



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-041-33637



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-040-33603



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-041-33603

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att rengöra
- Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som helst
- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och låsstatus indikator (röd/grön)

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)

Färger tillgängliga



Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt, pulverlackerad RAL 7035, för bottenvanna

Beställnings nr. 5555
Q90.195.060

Beställnings nr. 5536
Q90.195.120



Basskydd

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120




Q-Mover

för lätt transport av breda skåp igenom normala rumsdörrar

Beställnings nr. 30037



Teknisk data		Q90.195.120	Q90.195.060
Yttre mått B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning	kg	424	265
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	531	894
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	75
Kapacitet botten sump	Liter	33	22
Transportsockel			
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	1120	526

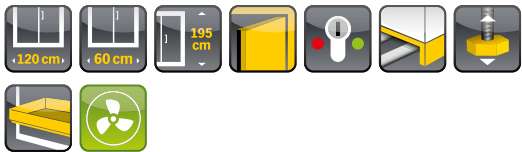

Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-040-33649
Beställnings nr. 30001-041-33649 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-041-33647
Beställnings nr. 30001-040-33647 (varningsgul)



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-040-33610
Beställnings nr. 30072-041-33610 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-040-33608
Beställnings nr. 30072-041-33608 (ljusgrått)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att rengöra
- Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgul (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som helst
- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och låsstatus indikator (röd/grön)

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 4 eller 6 utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)

Färger tillgängliga



Plastbricka för utdragbar låda

tillverkat av PP, grå eller vit

Beställnings nr. 18472
Q90.195.060

Beställnings nr. 10054
Q90.195.120



Basskydd

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120



Q-Mover

för lätt transport av breda skåp igenom normala rumsdörrar

Beställnings nr. 30037



Teknisk data		Q90.195.120	Q90.195.060
Yttre mått B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning	kg	424	265
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	531	894
Kapacitet draglåda	Liter	30,00	4,00
Transportsockel			
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	1120	526



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-040-33637



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-041-33637



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-040-33603



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-041-33603

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att rengöra
- Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- En-hands hantering av skåp med dubbla dörrar (AGT)
- Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av behållare
- Automatisk dörrstängning (TSA), efter ca 60 sekunder stängs öppnade dörrar, akustisk och visuell signal före stängning
- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och låsstatus indikator (röd/grön)

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)

Färger tillgängliga



Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt, pulverlackerad RAL 7035, för bottenvanna

Beställnings nr. 5555
Q90.195.060

Beställnings nr. 5536
Q90.195.120



Basskydd

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120



Q-Mover

för lätt transport av breda skåp igenom normala rumsdörrar

Beställnings nr. 30037



Teknisk data		Q90.195.120.WDAC	Q90.195.060.WDAC
Yttre mått B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning	kg	424	265
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	531	894
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	75
Kapacitet botten sump	Liter	33	22
Transportsockel			
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	1120	526



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-040-33649
Beställnings nr. 30002-041-33649 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-041-33647
Beställnings nr. 30002-040-33647 (varningsgul)



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-040-33610
Beställnings nr. 30074-041-33610 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-041-33608
Beställnings nr. 30072-040-33608 (varningsgul)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att rengöra
- Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som helst
- Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och låsstatus indikator (röd/grön)

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 4 eller 6 utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)

Färger tillgängliga



Plastbricka för utdragbar låda

tillverkat av PP, grå eller vit

Beställnings nr. 18472
Q90.195.060

Beställnings nr. 10054
Q90.195.120



Basskydd

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120



Q-Mover

för lätt transport av breda skåp igenom normala rumsdörrar

Beställnings nr. 30037



Teknisk data		Q90.195.120.WDAC	Q90.195.060.WDAC
Yttre mått B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning	kg	424	265
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	531	894
Kapacitet draglåda	Liter	30,00	4,00
Transportsockel			
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	1120	526



med
recirkulerande luftfiltersystem



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 33286-040-33543
Beställnings nr. 33286-046-33543 (Trafikröd)



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i trafikröd (RAL 3020), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 33286-046-33543
Beställnings nr. 33286-040-33545 (varningsgul)



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 33286-041-33543



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x brickhylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 33286-041-33545

Säker och godkänd lagring av brandfarliga vätskor och andra vådliga ämnen

Skåp

- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att rengöra
- Mellanvägg - ett skåp med två olika inredningar
- Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgul (RAL 1004), ljusgrått (RAL 7035) eller trafikröd (RAL3020)
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som helst
- Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och låsstatus indikator (röd/grön)

Recirkulerande luftfiltersystem

- Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 dB (A)
- Med flerstegsfilter
- VDE godkänd övervakningselektronik (utvinning och filterövervakning) inkl. anslutningskabel och nätkontakt
- Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
- Skärm med innovativ pekplatta
- ATEX compliant: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)

Färger tillgängliga




med
recirkulerande luftfiltersystem



Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljövänlig på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut
med multifas filtersystem

Beställnings nr. 32950

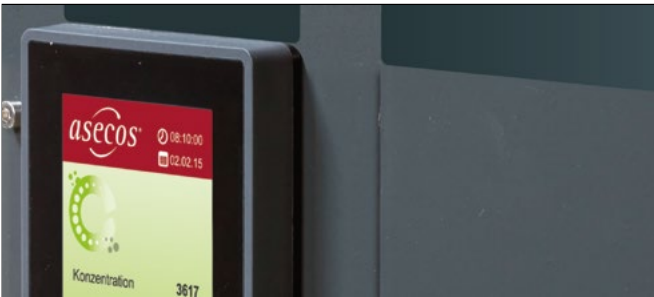

Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 " grafisk display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detaller

Teknisk data		FX90.229.120.MV
Yttre mått B x D x H	mm	1193 x 615 x 2294
Inre mått B x D x H	mm	vänster: 450 x 522 x 1647 höger: 450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning	kg	554
Maximal last	kg	600
Ytlast	kg/m²	595
Frekvens	Hz	50
Nominel spänning	V	230
Max. strömförbrukning	A	0,5
Strömförbruk vid operering	W	120
Strömförbruk i standby läge	W	50
Transportsockel		
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90
Lastpallbredd transportsockel	mm	1120



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32905-040-33649
Beställnings nr. 32905-046-33649 (Trafikröd, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 32905-041-33649 (ljusgrått, 6 x draglåda)



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i trafikröd (RAL 3020), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32905-046-33647
Beställnings nr. 32905-040-33647 (varningsgul, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 32905-041-33647 (ljusgrått, 4 x draglåda)



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i trafikröd (RAL 3020), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32915-046-33610
Beställnings nr. 32915-040-33610 (varningsgul, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 32915-041-33610 (ljusgrått, 6 x draglåda)



Recirkulerande luftfilterskåp
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32915-040-33608
Beställnings nr. 32915-046-33608 (Trafikröd, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 32915-041-33608 (ljusgrått, 4 x draglåda)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga vätskor och andra vådliga ämnen

Skåp

- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att rengöra
- Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgul (RAL 1004), ljusgrått (RAL 7035) eller trafikröd (RAL3020)
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- En-hands hantering av skåp med dubbla dörrar (AGT)
- Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av behållare
- Automatisk dörrstängning (TSA), efter ca 60 sekunder stängs öppnade dörrar, akustisk och visuell signal före stängning
- Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och låsstatus indikator (röd/grön)

Recirkulerande luftfiltersystem

- Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 dB (A)
- Med flerstegsfilter
- VDE godkänd övervakningselektronik (utvinning och filterövervakning) inkl. anslutningskabel och nätkontakt
- Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
- Skärm med innovativ pekplatta
- ATEX compliant: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Transport

- Valbar Q-Mover för inomhus transport
- Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd

Standardinredning

- 4 eller 6 utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)

Färger tillgängliga



Teknisk data		FX90.229.120.WDAC	FX90.229.060.WDAC
Yttre mått B x D x H	mm	1193 x 615 x 2294	599 x 615 x 2294
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning	kg	459	287
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	546	915
Frekvens	Hz	50	50
Nominel spänning	V	230	230
Max. strömförbrukning	A	0,5	0,5
Strömförbruk vid operering	W	120	120
Strömförbruk i standby läge	W	50	50
Transportsockel			
Lastpallhöjd transportsockel	mm	90	90
Lastpalbredd transportsockel	mm	1120	526

med recirkulerande luftfiltersystem



Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljövänlig på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut med multifas filtersystem

Beställnings nr. 32950
FX90.229.120.WDAC
Beställnings nr. 32951
FX90.229.060.WDAC



Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 " grafisk display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detalljer



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30115-002-33717
Beställnings nr. 30116-002-33717 (dörrfasthållare)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30115-001-33717
Beställnings nr. 30116-001-33717 (dörrfasthållare)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30227-001-33661
Beställnings nr. 30228-001-33661 (dörrfasthållare)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30227-002-33661
Beställnings nr. 30228-002-33661 (dörrfasthållare)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av behållare
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)

Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt, pulverlackerad RAL 7035, för bottenvanna

Beställnings nr. 5536
S90.196.120.WDAS



Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt, pulverlackerad RAL 7035, för bottenvanna

Beställnings nr. 5555
S90.196.060.WDAS



Teknisk data		S90.196.120(WDAS)	S90.196.060(WDAS)
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning	kg	420	260
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	10	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	528	893
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	75
Kapacitet botten sump	Liter	33	22





Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30116-002-33724
Beställnings nr. 30116-001-33724 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30116-001-33726
Beställnings nr. 30116-002-33726 (varningsgul)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30228-001-33681
Beställnings nr. 30228-002-33681 (varningsgul)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30228-002-33683
Beställnings nr. 30228-001-33683 (ljusgrått)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgul (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av behållare
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- 4 eller 6 utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)

Plastbricka för utdragbar låda

tillverkat av PP, grå eller vit

Beställnings nr. 10054
S90.196.120.WDAS

Beställnings nr. 18472
S90.196.060.WDAS



Teknisk data		S90.196.120.WDAS	S90.196.060.WDAS
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning	kg	420	260
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	10	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	528	893
Kapacitet draglåda	Liter	30,00	4,00



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120
varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30121-002-33746
Beställnings nr. 30122-002-33746 (dörrfasthållare)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30121-001-33746
Beställnings nr. 30122-001-33746 (dörrfasthållare)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30238-001-33737
Beställnings nr. 30239-001-33737 (dörrfasthållare)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060
varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30238-002-33737
Beställnings nr. 30239-002-33737 (dörrfasthållare)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratiörmöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av behållare
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- 2 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)

Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt,
pulverlackerad RAL 7035,
för bottenvanna

Beställnings nr. 5536
S90.129.120(.WDAS)



Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt,
pulverlackerad RAL 7035,
för bottenvanna

Beställnings nr. 5555
S90.129.060(.WDAS)



Teknisk data		S90.129.120(.WDAS)	S90.129.060(.WDAS)
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072
Vikt utan inredning	kg	270	170
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	6	3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	450	799
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	75
Kapacitet botten sump	Liter	33	22



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30122-001-33754
Beställnings nr. 30122-002-33754 (varningsgul)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30122-002-33753
Beställnings nr. 30122-001-33753 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30239-002-33741
Beställnings nr. 30239-001-33741 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30239-001-33740
Beställnings nr. 30239-002-33740 (varningsgul)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av behållare
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- 2 eller 3 draglådor (stålplåt pulverlackerad)

Plastbricka för utdragbar låda

tillverkat av PP, grå eller vit

Beställnings nr. 10054
S90.129.060.WDAS

Beställnings nr. 18472
S90.196.060.WDAS



Teknisk data		S90.129.120.WDAS	S90.129.060.WDAS
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072
Vikt utan inredning	kg	270	170
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	6	3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	450	799
Kapacitet draglåda	Liter	30,00	4,00



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120.MV.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30348-001-33848

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem

Teknisk data		S90.196.120.MV.WDAS	S90.196.060.MH.WDAS
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H	mm	vänster: 450 x 524 x 1742 höger: 450 x 524 x 1742	övre del: 450 x 524 x 877 nedre del: 450 x 524 x 845
Djup med öppna dörrar	mm	1174	1135
Vikt utan inredning	kg	515	260
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	8	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Ytlast	kg/m²	576	891
Max. vikt på hylla (jämnt fördelat)	kg	50	50
Kapacitet botten sump	Liter	11	11
Max. kapacitet brickhylla	Liter	11	11



Säkerhetsskåp
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060.MH.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 2 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30353-001-33835

- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av behållare
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- Vänster / övre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
- Höger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)



Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.MV.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30708-001-33848

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem

Teknisk data		S90.196.120.MV.FDAS	S90.196.060.MH.FDAS
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H	mm	vänster: 450 x 524 x 1742 höger: 450 x 524 x 1742	övre del: 450 x 524 x 877 nedre del: 450 x 524 x 845
Djup med öppna dörrar	mm	950	931
Vikt utan inredning	kg	515	260
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	8	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Ytlast	kg/m²	576	891
Max. vikt på hylla (jämnt fördelat)	kg	50	50
Kapacitet botten sump	Liter	11	11
Max. kapacitet brickhylla	Liter	11	11



Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.MH.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 2 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30709-001-33835

- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Vikdörr

- Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av behållare
- Utrymmesbesparande vikdörrar fodrar mindre utrymme framför skåpet när dörrarna är öppna
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- Vänster / övre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
- Höger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)



Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-001-33717

Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-002-33717

Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-001-33661

Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-002-33661

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Vikdörr

- Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av behållare
- Utrymmesbesparande vikdörrar fodrar mindre utrymme framför skåpet när dörrarna är öppna
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)

Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt, pulverlackerad RAL 7035, för bottenvanna

Beställnings nr. 5536
S90.196.120.FDAS



Perforerad insats (H=60 mm)

gjort av stålplåt, pulverlackerad RAL 7035, för bottenvanna

Beställnings nr. 5555
S90.196.060.FDAS



Teknisk data		S90.196.120.FDAS	S90.196.060.FDAS
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning	kg	420	260
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	10	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	528	893
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	75
Kapacitet botten sump	Liter	33	22





Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-001-33724
Beställnings nr. 30118-002-33724 (varningsgul)



Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-002-33726
Beställnings nr. 30118-001-33726 (ljusgrått)



Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-001-33681
Beställnings nr. 30233-002-33681 (varningsgul)



Säkerhetsskåp
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-002-33683
Beställnings nr. 30233-001-33683 (ljusgrått)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Vikdörr

- Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av behållare
- Utrymmesbesparande vikdörrar fodrar mindre utrymme framför skåpet när dörrarna är öppna
- Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)

Standardinredning

- 4 eller 6 utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)

Plastbricka för utdragbar låda


tillverkat av PP, grå eller vit

Beställnings nr. 10054
S90.196.120.FDAS

Beställnings nr. 18472
S90.196.060.FDAS



Teknisk data		S90.196.120.FDAS	S90.196.060.FDAS
Yttre mått B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning	kg	420	260
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	10	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5
Maximal last	kg	600	600
Ytlast	kg/m²	528	893
Kapacitet draglåda	Liter	30,00	4,00

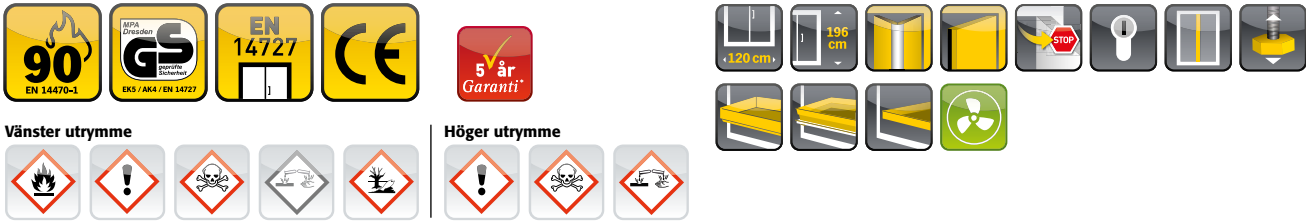

Combi säkerhetsskåp
K-PHOENIX-90 modell K90.196.120.MF.FWAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30333-001-33838



Combi säkerhetsskåp
K-PHOENIX-90 modell K90.196.120.MF.FWAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 6 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30333-001-33839

Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga ämnen i arbetsområden

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratiemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetsselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Två i en – förvaring av brandfarliga vätskor och aggressiva kemikalier i ett skåp
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem, med endast ett extraktionsluftinlopp
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt gol

Flygel och vikedörr

- Standard dörröppnings system (vänster utrymme), dörrar stannar i vilken position som helst (höger utrymme), bekväm och säker flyttning och lagring av behållare
- Dörrar låsbara med cylinderlås, integration i låssystemen är möjliga (vänster utrymme)

Standardinredning

- Vänster utrymme.: 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottenvanna (stålplåt pulverlackerad) eller 6 draglådor (stålplåt pulverlackerad)
- Höger utrymme.: 4 eller 6 draglådor (PP)

Teknisk data		K90.196.120.MF.FWAS
Yttre mått B x D x H	mm	1197 x 617 x 1969
Inre mått B x D x H	mm	vänster: 450 x 522 x 1742 höger uppe: 491 x 542 x 862 höger nere: 491 x 542 x 862
Djup med öppna dörrar	mm	1178
Vikt utan inredning	kg	515
Extraktionsluft	NW	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75
Kapacitet botten sump	Liter	22
Kapacitet draghylla	Liter	11,00
Kapacitet draglåda	Liter	



Combi säkerhetsskåp
K-PHOENIX Vol.2-90 modell K90.196.120.MF.FWAC
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30334-001-33838



Combi säkerhetsskåp
K-PHOENIX Vol.2-90 modell K90.196.120.MF.FWAC
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 6 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30334-001-33839

Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga ämnen i arbetsområden

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratiemöbler)

Funktion/ konstruktion

- En robust konstruktion med säkerhetsselement samlade utanför säkerhetsfacken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
- Två i en – förvaring av brandfarliga vätskor och aggressiva kemikalier i ett skåp
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem, med endast ett extraktionsluftinlopp
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt gol

Flygel och vikedörr

- Standard dörröppnings system (vänster utrymme), dörrar stannar i vilken position som helst (höger utrymme), bekväm och säker flyttning och lagring av behållare
- Automatisk dörrstängningsystem släpper stängda dörrar efter ca. 60 sekunder inkluderar akustisk och visuell signal före stängning (vänster utrymme)
- Dörrar låsbara med cylinderlås, integration i låssystemen är möjliga (vänster utrymme)

Standardinredning

- Vänster utrymme.: 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottenvanna (stålplåt pulverlackerad) eller 6 draglådor (stålplåt pulverlackerad)
- Höger utrymme.: 4 eller 6 draglådor (PP)

Teknisk data		K90.196.120.MF.FWAC
Yttre mått B x D x H	mm	1197 x 617 x 1969
Inre mått B x D x H	mm	vänster: 450 x 524 x 1742 höger uppe: 491 x 542 x 862 höger nere: 491 x 542 x 862
Djup med öppna dörrar	mm	1178
Vikt utan inredning	kg	515
Extraktionsluft	NW	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75
Kapacitet botten sump	Liter	22
Kapacitet draghylla	Liter	11,00
Kapacitet draglåda	Liter	



Vänster utrymme



Höger utrymme



Kombination underbänk skåp

K-UB-90 modell K90.060.140.050.UB.3T

Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 1 x draghylla (panel/PP)

Beställnings nr. 30377-001-33846

inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 2 x draghylla (panel/PP)

Beställnings nr. 30377-001-33847



Kombination underbänk skåp

K-UB-90 modell K90.060.140.050.UB.ST

Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) (panel/PP)

Beställnings nr. 30370-001-30372

inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) (panel/PP)

Beställnings nr. 30370-001-30371



Kombination underbänk skåp

K-UB-90 modell K90.060.110.050.UB.2T

Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 1 x draghylla (panel/PP)

Beställnings nr. 30365-001-33844

inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 2 x draghylla (panel/PP)

Beställnings nr. 30365-001-33845



Kombination underbänk skåp

K-UB-90 modell K90.060.110.050.UB.ST

Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) (panel/PP)

Beställnings nr. 30358-001-30360

inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) (panel/PP)

Beställnings nr. 30358-001-30359

Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga ämnen i arbetsområden

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- Två separata förvaringsfack för förvaring av brandfarliga vätskor, syror och baser
- Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluftningssystem, utvinning av båda avdelningarna genom ett extraktionsluftintag på baksidan av skåpet

Lagring av brandfarliga vätskor (vänster del)

- Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
- 135° öppning av flygeldörrar
- Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig
- Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning inkl. klämma och en svetstätad sump
- Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
- Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system

Lagring av aggressiva, icke branfarliga vätskor (höger del)

- Tillverkad av melaminbelagda special arbetsplattor
- Draghyllor av hög kvalitet och stadig konstruktion med uttagbara plastbrickor

Transport

- Hjul sockel som tillval



stabil –lätt att flytta på skåpet

säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism

flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)

gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30374

K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

Beställnings nr. 30362

K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

Teknisk data		K90.060.110.050.UB.ST	K90.060.110.050.UB.2T	K90.060.140.050.UB.ST	K90.060.140.050.UB.3T
Yttre mått B x D x H	mm	1102 x 502 x 601	1102 x 502 x 601	1402 x 502 x 601	1402 x 502 x 601
Inre mått B x D x H	mm	vänster: 470 x 381 x 502 höger: 440 x 468 x 562	vänster: 470 x 380 x 502 höger: 440 x 468 x 562	vänster: 770 x 381 x 502 höger: 440 x 468 x 562	vänster: 770 x 380 x 502 höger: 440 x 468 x 562
Djup med öppna dörrar	mm	964	1044	964	964
Vikt utan inredning	kg	155	155	197	197
Extraktionsluft	NW	50	50	50	50
Luft ändring 10 times	m³/h	2	2	3	3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1	1	1	1
Maximal last	kg	300	300	300	300
Ytlast	kg/m²	275	275	236	236
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg		25,00		25,00
Kapacitet draghylla	Liter	11,00	11,00	11,00	11,00
Kapacitet botten sump	Liter	10,00		16,50	16,50



Säkerhetsskåp
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.110.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x hylla (stålplåt pulverlackerad), 1 x transportsockel (stål pulverlackerad), 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30393-001-30397



Säkerhetsskåp
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.110.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30393-001-30394



Säkerhetsskåp
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30382-001-30383



Säkerhetsskåp
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x hylla (stålplåt pulverlackerad), 1 x transportsockel (stål pulverlackerad), 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30382-001-30386



Säkerhetsskåp
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med hyllor (stål förzinkad)
Beställnings nr. 30382-001-30387

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Jordad länk från ena sidan till den andra på baksidan av skåpet, inne i skåpet med jordningstrådar inkl. klämma
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr

- Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av behållare
- Dörrar låsbara med cylinderlås

Standardinredning

- Hyllor med lastkapacitet 75 kg
- Vannpallet med galler - en robust, förzinkad version (kapacitet 225 liter och 850 kg/m² lastkapacitet)
- Hyllsystem - monteras inuti skåpet, inkl. sump (80 liters kapacitet)

Teknisk data		XL90.222.110.WDAS	XL90.222.155.WDAS
Yttre mått B x D x H	mm	1105 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224
Inre mått B x D x H	mm	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Vikt utan inredning	kg	855	1150
Extraktionsluft	NW	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	17	24
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	15	15
Maximal last	kg	1000	1000
Ytlast	kg/m²	832	685
Max. vikt på hylla (jämt fördelat)	kg	75	75
Kapacitet botten sump	Liter	225	248



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.059.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30472-001-35286



Underbänk säkerhetsskåp
UB-T-90 modell UB90.060.059.T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30481-001-33763



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.059.050.S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30473-001-35295



Underbänk säkerhetsskåp
UB-T-90 modell UB90.060.059.050.T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30483-001-33765

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr och draglåda

- Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
- 135° öppning av flygeldörrar
- Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig
- Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning inkl. klämma och en svetstätad sump
- Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
- Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system

Transport

- Hjul sockel som tillval

Standardinredning

- Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg (skåp med draglåda)
- Bottenvanna med perforerad insats (skåp med flygeldörrar)



stabil –lätt att flytta på skåpet
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)

gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30478
Alla modeller

Teknisk data		UB90.060.059.S	UB90.060.059.050.S	UB90.060.059.T	UB90.060.059.050.T
Yttre mått B x D x H	mm	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600
Inre mått B x D x H	mm	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar	mm	990	918	1044	1044
Tyngd utan interiör inredning	kg	120	110	120	110
Extraktionsluft	NW	50	50	50	50
Luft ändring 10 times	m³/h	1	1	1	1
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1	1	1	1
Maximal last	kg	300	300	300	300
Ytlast	kg/m²	450	460	450	460
Kapacitet av draglåda	Liter	11,50	10,00		
Kapacitet botten sump	Liter			12,00	10,00
Max. Last perforerad insättning	kg	75,00		75,00	75,00



Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr och draglåda

- Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
- 135° öppning av flygeldörrar
- Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig
- Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning inkl. klämma och en svetstätad sump
- Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
- Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system

Transport

- Hjul sockel som tillval

Standardinredning

- Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg (skåp med draglåda)
- Bottenvanna med perforerad insats (skåp med flygeldörrar)



stabil –lätt att flytta på skåpet
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)

gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30461
Alla modeller



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.089.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30457-001-35299



Underbänk säkerhetsskåp
UB-T-90 modell UB90.060.089.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30464-001-33767




Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.089.050.S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30458-001-35308



Underbänk säkerhetsskåp
UB-T-90 modell UB90.060.089.050.2T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30465-001-33769

Teknisk data		UB90.060.089.S	UB90.060.089.050.S	UB90.060.089.2T	UB90.060.089.050.2T
Yttre mått B x D x H	mm	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600
Inre mått B x D x H	mm	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar	mm	990	918	992	920
Tyngd utan interiör inredning	kg	140	125	140	125
Extraktionsluft	NW	50	50	50	50
Luft ändring 10 times	m³/h	2	1	2	1
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1	1	1	1
Maximal last	kg	300	300	300	300
Ytlast	kg/m²	313	317	313	317
Kapacitet av draglåda	Liter	21,00	17,50		
Kapacitet botten sump	Liter			20,00	16,50
Max. Last perforerad insättning	kg	75,00		75,00	75,00

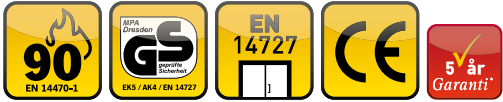

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr och draglåda

- Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
- 135° öppning av flygeldörrar
- Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig
- Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning inkl. klämma och en svetstätad sump
- Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
- Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system

Transport

- Hjul sockel som tillval

Standardinredning

- Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg (skåp med draglåda)
- Bottenvanna med perforerad insats (skåp med flygeldörrar)



stabil –lätt att flytta på skåpet
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)

gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30362
Alla modeller



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.110.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30420-001-35327



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.110.050.S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30421-001-35340



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.110.2S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 2 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30427-001-35311



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.110.050.2S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30428-001-35337




Underbänk säkerhetsskåp
UB-T-90 modell UB90.060.110.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30443-001-33771



Underbänk säkerhetsskåp
UB-T-90 modell UB90.060.110.050.2T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30444-001-33775

Teknisk data		UB90.060.110.S	UB90.060.110.050.S	UB90.060.110.2S	UB90.060.110.050.2S
Yttre mått B x D x H	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Inre mått B x D x H	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar	mm	990	918	990	918
Tyngd utan interiör inredning	kg	180	160	180	160
Extraktionsluft	NW	50	50	50	50
Luft ändring 10 times	m³/h	2	2	2	2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1	1	1	1
Maximal last	kg	300	300	300	300
Ytlast	kg/m²	277	278	277	278
Kapacitet av draglåda	Liter	26,00		11,50	10,00

Teknisk data		UB90.060.110.2T	UB90.060.110.050.2T
Yttre mått B x D x H	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Inre mått B x D x H	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar	mm	1097	1025
Vikt utan inredning	kg	180	160
Extraktionsluft	NW	50	50
Luft ändring 10 times	m³/h	2	2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1	1
Maximal last	kg	300	300
Ytlast	kg/m²	277	278
Kapacitet botten sump	Liter	25	22
Max. Last perforerad insättning	kg	75	75

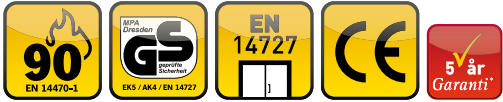



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.140.2S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål), 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30401-001-35345



Underbänk säkerhetsskåp
UB-ST-90 modell UB90.060.140.S2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna, 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30410-001-33777



Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.060.140.050.2S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda, 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30402-001-35359



Underbänk säkerhetsskåp
UB-ST-90 modell UB90.060.140.050.S2T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna, 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30411-001-33779

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluftningssystem

Flygeldörr och draglåda

- Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
- 135° öppning av flygeldörrar
- Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig
- Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning inkl. klämma och en svetstätad sump
- Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
- Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system

Transport

- Hjul sockel som tillval

Standardinredning

- Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg (skåp med draglåda)
- Bottenvanna med perforerad insats (skåp med flygeldörrar)



stabil –lätt att flytta på skåpet
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)

gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30374
Alla modeller

Teknisk data		UB90.060.140.2S	UB90.060.140.050.2S	UB90.060.140.S2T	UB90.060.140.050.S2T
Yttre mått B x D x H	mm	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600
Inre mått B x D x H	mm	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar	mm	990	918	990	918
Tyngd utan interiör inredning	kg	230	205	230	205
Extraktionsluft	NW	50	50	50	50
Luft ändring 10 times	m³/h	3	3	3	3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1	1	1	1
Maximal last	kg	300	300	300	300
Ytlast	kg/m²	240	240	240	240
Kapacitet av draglåda	Liter	21,00/11,50	17,50/17,50	11,50	10,00
Kapacitet av bottenvanna	Liter			20,00	16,50
Lastkapacitet av perforerad insats	kg	75,00		75,00	75,00



Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i arbetsomgivningar

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluftningssystem

Draglåda

- Draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
- 135° öppning av flygeldörrar
- Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig
- Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning inkl. klämma och en svetstätad sump
- Lådor självstängande vid brand
- Låsbar med cylinderlås och låsstatus indikator

Transport

- Hjul sockel som tillval

Standardinredning

- Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg



stabil –lätt att flytta på skåpet
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)

gjort av stål,
pulverlackerad RAL 7036

Beställnings nr. 30362
UB90.080.110.2S

Beställnings nr. 30478
UB90.080.059.060.S

Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.080.110.060.2S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 2 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 32657-001-35373

Underbänk säkerhetsskåp
UB-S-90 modell UB90.080.059.060.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 32658-001-35377

Special höjd 800 mm
Optimalt utnyttjande av det inre utrymmet - på två nivåer är det möjligt att lagra 2,5 liters flaskor.



Teknisk data		UB90.080.110.060.2S	UB90.080.059.060.S
Yttre mått B x D x H	mm	1102 x 600 x 800	593 x 600 x 800
Inre mått B x D x H	mm	979 x 482 x 702	470 x 482 x 702
Djup med öppna dörrar	mm	994	990
Vikt utan inredning	kg	233	143
Extraktionsluft	NW	50	50
Luft ändring 10 times	m³/h	2	2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1	1
Maximal last	kg	300	300
Ytlast	kg/m²	302	467
Draglådans kapacitet	Liter	21,5/21,5	21,5



Underbänk säkerhetsskåp med kylaggregat
UB-S-90K modell UB90.060.110.KU.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (rostfritt stål)
Beställnings nr. 31827-001-35322



Säker, kyld och godkänd förvaring av lättantändliga ämnen i arbetsområden

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- Kylaggregat—konstant kyleffekt inuti skåpet, med maximalt 2 ° C kyltemperatur (vid max . 25 ° C rumstemperatur)
- Skåp och draglåda tillverkat av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)

Draglåda


- Draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
- Lådor självstängande vid brand
- Låsbar med cylinderlås och låsstatus indikator

Transport

- Integrerade hjul med sockelskydd

Standardinredning

- Dragbricka —integrerad i skåpet (standard), lastkapacitet 50 kg
- Gott om utrymme för små behållare, optimalt utnyttjande av det inre utrymmet vid lagring av små behållare

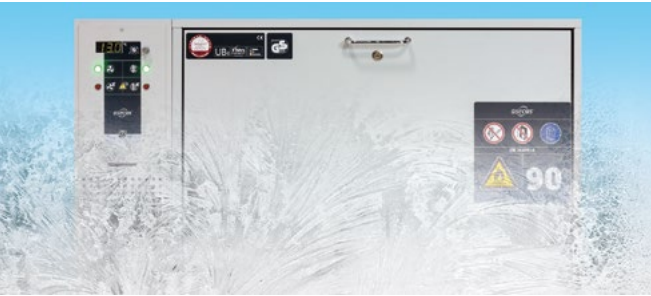

Underbänk säkerhetsskåp med kylaggregat och anslutningsbart luftventilationssystem - undvik komplexa vägg och tak öppningar och dyra frånluftskanaler

- hög flexibilitet i val av installations plats
- aktiv personligt skydd genom avskiljning av skadliga ångor, som samlas i filtersystemet
- med flerstegsfiltersystem, anslutningskabel och stickkontakt
- inkl. utvinning och filterövervakning - EMV godkänd av VDE
- optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt

Underbänk skåpet med insatt flerstegsfiltersystem är kapabelt att bibehålla lösningsmedelsångor (kolväten) permanent upp till filter mättnad av mer än 99,999% under normala driftsförhållanden som vid en simulerad olycka i säkerhetsskåpet..

Andra våningens draglåda

Gott om utrymme för små behållare, optimalt utnyttjande av det inre utrymmet vid lagring av små behållare

Beställnings nr. 32121

Teknisk data		UB90.060.110.KU.S
Yttre mått B x D x H	mm	1 108 x 574 x 630
Inre mått B x D x H	mm	753 x 443 x 484
Djup med öppna dörrar	mm	956
Vikt utan inredning	kg	220
Extraktionsluft	NW	50
Luft ändring 10 times	m³/h	
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	1
Maximal last	kg	300
Ytlast	kg/m²	298



Skåp för gastuber
G-OD modell GOD.215.135.WDFW
ljusgrått (RAL 7035), med fasta fönster och enstandard interiör utrustning för 5 x 50 liters gastuber
Beställnings nr. 30730-015
Beställnings nr. 30731-015 (GOD.215.135.WDHW, med gångjärnsförsedda fönster)



Skåp för gastuber
G-OD modell GOD.215.135
ljusgrått (RAL 7035), med standardinredning för 5 x 50 liters gastuber
Beställnings nr. 30692-015



Skåp för gastuber
G-OD modell GOD.215.100
ljusgrått (RAL 7035), med standardinredning för 3 x 50 liters gastuber
Beställnings nr. 30697-015
Beställnings nr. 30732-015 (GOD.215.100.WDFW, med fastställda fönster)
Beställnings nr. 30735-015 (GOD.215.100.WDHW, med gångjärnsförsedda fönster)



Skåp för gastuber
G-OD modell GOD.215.070.R
ljusgrått (RAL 7035), med standardinredning för 2 x 50 liters gastuber
Beställnings nr. 30701-015
Beställnings nr. 30752-015 (GOD.215.070.WDFWR, med fastställda fönster)
Beställnings nr. 30753-015 (GOD.215.070.WDHW, med gångjärnsförsedda fönster)

Säker och godkänd utomhus förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser

Funktion/ konstruktion

- En robust, konstruktion av hög kvalitet, helt förzinkad med pulverlackerad yta och bas av rostfritt stål
- Lätt installation, 16 genomföringsmöjligheter markerade på skåpets tak
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Effektiv ventilation genom öppningar nedanför dörrarna och vid den bakre väggen
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Tillgänglig med valfria fönster (fast eller gångjärnsförsedda fönster)
- Låsbar vändspak (dörrar finns även tillgängliga med cylinderlås, vilka är förenliga för låssystem)

Tak

- Sluttande tak framme låter vattnet rinna av och därmed undviks att väggarna förstörs



Rullande ramp

snabbt ihopbyggd, lätt och trygg manövrering av tuber

Beställnings nr. 30702

GOD.215.070.R/WDFWR/WDHWR

Beställnings nr. 30698

GOD.215.100(WDFW/WDHW)

Beställnings nr. 30693

GOD.215.135(WDFW/WDHW)

Hylla

tillverkad av plåtstål
pulverlackerad RAL 7035

Beställnings nr. 30703

GOD.215.070.R/WDFWR/WDHWR


Beställnings nr. 30699

GOD.215.100(WDFW/WDHW)

Beställnings nr. 30694

GOD.215.135(WDFW/WDHW)

Teknisk data		GOD.215.135(WDFW/WDHW)	GOD.215.100(WDFW/WDHW)	GOD.215.070.R (WDFWR/WDHWR)
Yttre mått B x D x H	mm	1356 x 400 x 2149	1006 x 400 x 2149	706 x 400 x 2149
Inre mått B x D x H	mm	1345 x 370 x 2070	995 x 370 x 2070	695 x 370 x 2070
Vikt utan inredning	kg	138	113	85
Extraktionsluft	NW	75	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	10	8	5
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5	5
Maximal last	kg	600	600	600
Ytlast	kg/m²	390	509	699

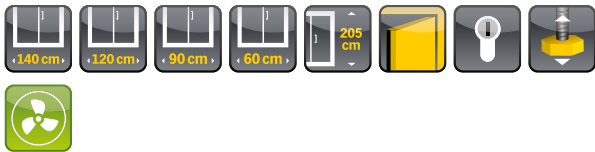

Skåp för gastuber
G-CLASSIC-30 modell G30.205.140
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30651-001-30652 (för 4 x 50 liter gasflaskor)



Skåp för gastuber
G-CLASSIC-30 modell G30.205.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30663-001-30664 (för 4 x 50 liter gasflaskor)



Skåp för gastuber
G-CLASSIC-30 modell G30.205.090
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30673-001-30674 (för 3 x 50 liter gasflaskor)



Skåp för gastuber
G-CLASSIC-30 modell G30.205.060
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30685-001-30687 (för 2 x 50 liter gasflaskor)

Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-2
- Brandskydd i 30 minuter
- CE överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- Enkel installation av utrustning och ledningar - hög inre rymd (1890 mm), möjlighet upp till 60 genomförings möjligheter på toppen av skåpet
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)


Standardinredning

- Standardinredning – komplett med monteringsckenor, rullramp, tubhållaren och matchande spännband
- Tubhållaren över hela skåpets bredd
- Lateral tubhållare för två 10-liters tuber, alternativt även en höjjusterbar version (inga verktyg krävs)

Gastubsvagn

för en 50-liters gastub
B x D x H (mm):
320 x 335 x 1090

Beställnings nr. 26294

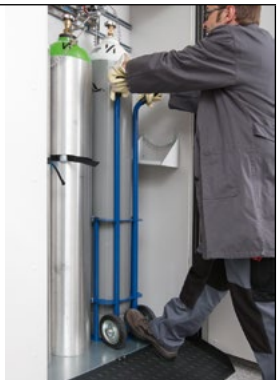


Lateral tubhållare

för två 10-liters tuber,
justerbar höjd, tillverkat av stålplåt
pulverlackerad (RAL 7035)

Beställnings nr. 30648



Teknisk data		G30.205.140	G30.205.120	G30.205.090	G30.205.060
Yttre mått B x D x H	mm	1398 x 616 x 2050	1198 x 616 x 2050	898 x 616 x 2050	598 x 616 x 2050
Inre mått B x D x H	mm	1294 x 479 x 1874	1094 x 479 x 1874	794 x 479 x 1874	494 x 479 x 1874
Djup med öppna dörrar	mm	1301	1201	1051	1136
Vikt utan inredning	kg	545	485	340	290
Maximal last	kg	600	600	600	600
Vtlast	kg/m²	507,00	560,00	648,00	921,00
Extraktionsluft	NW	75	75	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	12	10	7	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5	5	5
Luftväxling 120 times	m³/h	139	118	86	53
Tryckförlust (vid 120 luftbyten)	Pa	143	103	147	85
Genomförings möjligheter		60	48	24	12

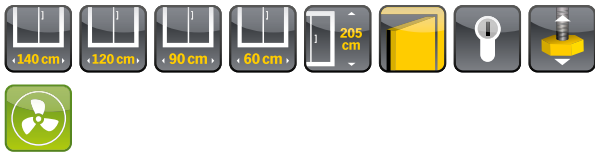



Skåp för gastuber
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.140
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30641-001-30642 (för 4 x 50 liter gasflaskor)



Skåp för gastuber
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30657-001-30658 (för 4 x 50 liter gasflaskor)



Skåp för gastuber
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.090
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30667-001-30668 (för 3 x 50 liter gasflaskor)



Skåp för gastuber
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.060.2F
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och pulverlackerad)
Beställnings nr. 30678-001-30682 (för 2 x 50 liter gasflaskor)

Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden

- Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-2
- Brandresistans 90 minuter
- CE överensstämmelse
- GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)

Funktion/ konstruktion

- Enkel installation och anslutning av ledningar - höga interiör höjder (1858 mm), 72 genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet
- Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem
- Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv

Flygeldörr

- Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)


Standardinredning

- Standardinredning – komplett med monteringsckenor , rullramp, tubhållaren och matchande spännband
- Tubhållaren över hela skåpets bredd
- Lateral tubhållare - för två 10-liters tuber, alternativt även en höjjusterbar version (inga verktyg krävs) (inte möjlig för modell G90.205.060.2F)

Gastubsvagn

för en 50-liters gastub
B x D x H (mm):
320 x 335 x 1090

Beställnings nr. 26294

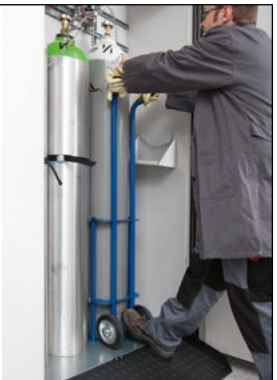

Lateral tubhållare

för två 10-liters tuber,
justerbar höjd, tillverkat av stålplåt
pulverlackerad (RAL 7035)

Beställnings nr. 30648



Teknisk data		G90.205.140	G90.205.120	G90.205.090	G90.205.060.2F
Yttre mått B x D x H	mm	1398 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	898 x 615 x 2050	598 x 615 x 2050
Inre mått B x D x H	mm	1245 x 400 x 1858	1045 x 400 x 1858	745 x 425 x 1858	477 x 425 x 1858
Djup med öppna dörrar	mm	1337	1238	1090	1135
Vikt utan inredning	kg	690	610	490	365
Maximal last	kg	600	600	600	600
Ytlast	kg/m²	571,00	625,00	752,00	999,00
Extraktionsluft	NW	75	75	75	75
Luft ändring 10 times	m³/h	9	8	6	4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten)	Pa	5	5	5	5
Luftväxling 120 times	m³/h	111	93	66	45
Tryckförlust (vid 120 luftbyten)	Pa	54	49	42	45
Genomförings möjligheter		72	60	36	24



Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30
för säkerhetsskåp
Beställnings nr. 25099



infr

serv

höchst

Luftomcirkulationssystemet
från asecos-framgångsrikt provats av
det certifierade testinstitutet:

Omluftsfiltersystem enligt
RL 2006/95/EC (lågspännings direktiv)
marking **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
and **EMC Directive RL 2004/108/EC**
och **RL 2014/34/EU** (ATEX Direktiv)



ALTERNATIV 1
Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS
för underbänkskåp
Beställnings nr. 27144
Beställnings nr. 26885 (adapter som separat inhysning för lateral montering)



ALTERNATIV 2
Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS
för underbänkskåp
Beställnings nr. 27144
Beställnings nr. 23458 (adapter för väggmontage)

Recirkulerande luftfiltersystem – undvik komplexa
vägg-genomföringar och dyra frånluftskanaler

- hög flexibilitet vid val av installationsplats
- aktiv personligt skydd genom avskiljning av skadliga ångor, som samlats i filtersystemet
- mycket låg ljudnivå, endast ca. 39 dB (A)
- ATEX kompatibel: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- hölje tillverkat av pulverlackerat stålplåt
- med flerstegsfiltersystem och strömkabel
- inkl. övervakningselektronik för frånluft och filterövervakning , EMC-provad av VDE
- optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt

Plug-in recirkulerande luftfiltersystemet är av typ UFA.20.30 och kan lagra lösningsmedelsångor (kolväten) permanent upp till en filter mättnad på mer än 99,999%, under normala driftsförhållanden såväl som i simulerade olyckor i säkerhetsskåp.

Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS har utvecklats speciellt för tryckförhållanden och volymflöden i säkerhetsskåp med liten inre volym. Det kan installeras på en monterar på toppen av ett säkerhetsskåp eller på en vägg.



Ersättningsfilter
aktivt kolfilter
vikt 4.2 kg

Beställnings nr. 24212
Alla modeller

Teknisk data		UFA.20.30*
Yttre mått B x D x H	mm	305 x 555 x 210
Tyngd	kg	17
Volymström	m³/h	25
Nominel spänning	V	230
Frekvens	Hz	50/60
Max. strömförbrukning	A	0,07
Ljud nivå (ca.)	dB	39
Strömförbrukning i på -läge	W	21
Hastighet	rpm	2200
Potentialfri larmkontakt med passande kontakt		
Max. Nominell spänning AC	V	230
Max. Nominell spänning DC	V	30
Max. Kontinuerlig ström	A	10



Frånluftsaggregat HFEA.8677.
CE överensstämmelse: CE II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 14218



Frånluftsaggregat HFEA.11442.
med frånlufts övervakning, CE överensstämmelse: CE II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 14220
Frånluftsaggregat HFEA.17447.
med frånlufts övervakning med potentialfri larmkontakt , CE överensstämmelse:
CE II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 16454



Frånluftsaggregat HFEA.11570.
för väggmontage CE överensstämmelse: CE II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 17178



Frånluftsaggregat HFEA.15575.
för väggmontage med frånlufts övervakning, CE överensstämmelse:
CE II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 17177
Frånluftsaggregat HFEA.17448.
för väggmontage med frånlufts övervakning med potentialfri larmkontakt , CE
överensstämmelse: CE II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 18568

Frånluftsaggregat för montering på skåp eller vägg- montage – redo att anslutas, enkel och snabb instal- lation

Fångar säkert upp lättflyktiga ångor och gaser

- mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
- med anslutningskabel och strömkabeln
- Passande anslutning DN 75
- ATEX kompatibel: CE II 3/-G Ex c IIC T4

Med frånluftsövervakningintegrerad tryckläckage detektorom
fläkten inte fungerar släcks den gröna lampan och den röda
lampan tänds

För väggmontering

- inkl. installationsfäste, flexibel slang, slangklämmor och installationsmaterial

Filtreringsenheten har utvecklats speciellt för tryckförhållanden och volym-
flöden i säkerhetsskåp med liten inre volym.



Filtreringsenhet för underbänk-skåp

för installation på vägg med
filtrerings luftmonitor
(utan underbänk-skåp)

Beställnings nr. 24315

med potentialfri larmkontakt

Beställnings nr. 24732

Teknisk data		Alla modeller
Yttre mått B x D x H	mm	200 x 400 x 200
Tyngd	kg	10,1
Nominel spänning	V	230
Frekvens	Hz	50
Max. strömförbrukning	A	0,35
Ljud nivå (ca.)	dB	35,0
Strömförbrukning i på -läge	W	45
	rpm	



Daglig hantering av vådligt material



1




2



3



4

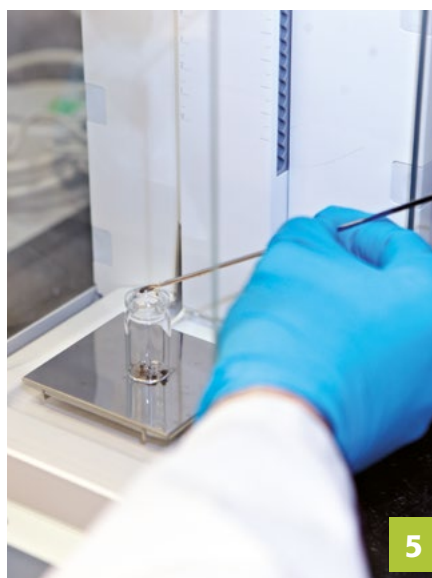

5



6

1.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för limning, gjutning och städning vid Endress+Hauser Flowtec, Reinach, Switzerland.

4.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen med leverans system för Kemiska och Veterinära Undersöknings Institutet, Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld, Germany.

2.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för återställning av böcker med lösningsmedel vid stadens arkiv, Bochum, Germany.

5.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för undersökning av kemiska prover på Bayer CropScience, Monheim, Germany.

3.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för utredning av vävnadsprover vid Medical University, Innsbruck, Austria.

6.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för testning av mobila fordon vid brandkåren, Cologne, Germany.

Farliga ämnen på arbetsplatsen



Djup 600 mm
Höjd 1100 mm
Höjd 1400 mm



Djup 750 mm
Höjd 1100 mm
Höjd 1400 mm

Farliga ämnen på arbetsplatsen EX-LINE




Djup 750 mm
Höjd 1400 mm

Farliga ämnen på arbetsplatsen Farmaceutiska ångor



Djup 600 mm
Höjd 1460 mm

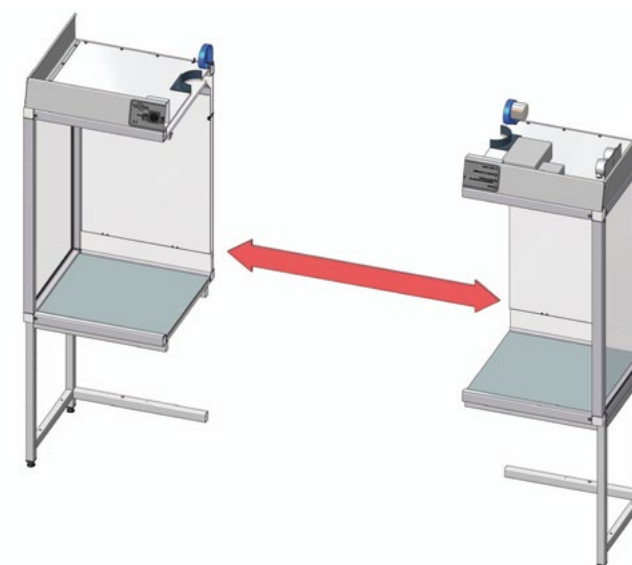

Farliga ämnen på arbetsplatsen med modulstruktur

Bredd kan öka ända från 300 mm till en total bredd av 5400 mm.

Skicka oss din förfrågan eller begär ytterligare information.

**1 Frånlufts övervakning**

- med visuellt och akustiskt larm
- valfritt inkluderas potentialfri larmkontakt
- Integrerade på / av-knappar och strömbrytare

**2 Anti-reflex belysning**


- energisparande lampa med borttagbar skärm
- lättillgänglig, enkelt utbyte av lysröret

**3 Deflektor**

- lätt att demontera för optimal rengöring
- enkel rengöring av hela interiören
- en transparent version av den bakre väggen och deflektorn finns att välja som tillval, idealisk för placering i mitten av ett rum

**4 Transparenta sidopaneler**

- optimal ljusstyrka på riskfyllda arbetsplatsen, transparenta sidopaneler tillverkade av 5mm härdat säkerhetsglas
- slutna version finns även som tillval, special material bräddor belagda i melaminharts

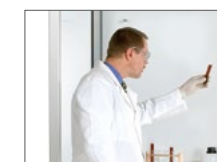**5 Media kanal**

- valfritt, för anslutning av ett brett spektrum av medieförnödenheter såsom vatten, gas, tryckluft etc.

**6 Eluttag med en jordad kontakt**

- skvätt-tät IP 54, integrerad i mediakanal som standard (min. 2)
- ytterligare uttag på beställning (också möjlig utan mediakanal)

**7 Aluminium rörrams konstruktion**

- robust, styv konstruktion, låg vikt, lågt golvtryck
- anodiserad yta, kemiskt resistent

**8 Arbetsytor**

- välj efter behov från: speciella material överdragna med melaminharts, 1,4301 rostfritt stål eller teknisk keramik (hög motståndskraft mot många syror och baser)
- Arbetsplatsen för vådliga ämnen är också tillgänglig utan arbetsyta, idealisk för montering på befintliga arbetsytor

**9 Stödramar**

- kan väljas för stående eller sittande arbete
- stark rörrams design, material styrka 4 mm, ljusgrått pulverlackerat (liknande till RAL 7035)
- höjd kan ställas in med hjälp av justerbara fötter, täcke finns som tillval

**10 Kan kombineras med en mängd olika underbänkskåp**

- för lagring av brandfarliga vätskor, syror, baser etc.
- kan användas tillsammans med stödramar
- matchande lock för ett elegant utseende (tillval)

**11 Avfallssystem för typ 90 underbänkskåp**

- passande för arbetsplatser med farligt gods





Säkerhetsbänk för dispensering av läkemedel
modell APA.145.090
medieförsörjning valfritt
Beställnings nr. 31834



Säkerhetsbänk för dispensering av läkemedel
modell APA.145.075
Beställnings nr. 31833

Säkerhetsbänk för dispensering av läkemedel enligt
DIN 12924 Part 4: 2012

- säker hantering av kemikalier, skydd mot vådliga ångor och explosionsrisk
- lätt monteras på en bordsskiva
- en robust konstruktion tillverkat av kemiskt resistent, antibakteriell, pulverlackerad stålplåt
- luftutrustning provad av erkända testinstitut

Standard utrustning

- frånluftsfläkt
- övervaknings elektronik med visuell och akustisk larm
- arbetsplatsbelysning
- ett steglöst höjinställbart skärp gjort av akrylglas
- 2 uttag

Tillval tillgängliga:

Ventilations serie 1


- 1 m flexibel slang DN100
- 2 slangklämmor
- 1 väggenomförning

Ventilation serie 2

- 7,5 m flexibel slang DN125
- 2 slangklämmor
- 1 väggenomförning
- 1 reducerand adapter DN100/125

Ventilation serie 3

- 1 fläkt DN150
- 2 reducerande adaptrar DN150/125
- 7,5 m flexibel slang DN125
- 2 slangklämmor
- 6 skruvar 4,2 x 16

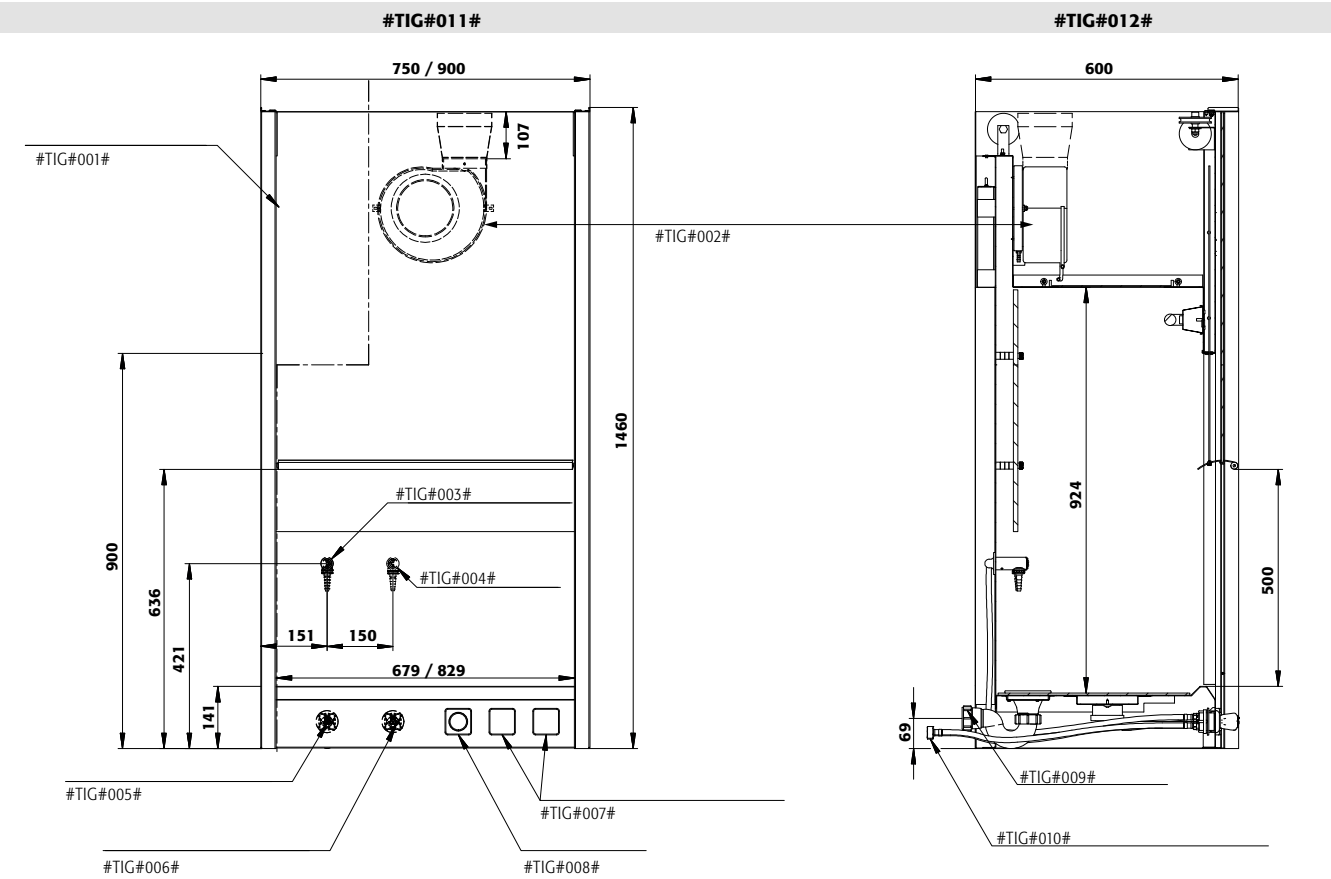

Teknisk data		APA.145.075	APA.145.090
Yttre mått B x D x H	mm	750 x 600 x 1460	900 x 600 x 1460
Bred användbar arbetsyta	mm	745	895
Djup användbar arbetsyta	mm	440	440
Tyngd	kg	91	100
Extraktionsluft	NW	100	100
Mängden luftkanaler	stycke	1	1
Nominell volymflöde	m ³ /h	330	330
Differenstryck per luftkanalen	Pa	315	315
Frekvens	Hz	50/60	50/60
Strömförbrukning i på -läge	W	160	160
Strömförbrukning i standby- läge	W	0,5	0,5
Nominel spänning	V	230	230
Strömförsörjning 230 V, 50 Hz, lågenergilampa, on-off knapp, strömbrytare, övervakningselektronik, tilluftsfläkt, 2 jordade uttag 230V, 50 Hz. Enheten är skyddad med en 4 A säkring.			

Produktöversikt: asecos kompletta utbud

Säker hantering, godkänd lagring och miljöskydd: Asecos erbjuder ett brett utbud av säkerhetsprodukter.



Säkerhetsskåp





Extrahering av farliga ämnen






Vannsystem och behållare





Hantering av farliga ämnen




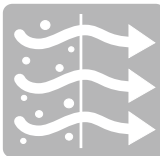

Luftreningskoncept




asecos WEB

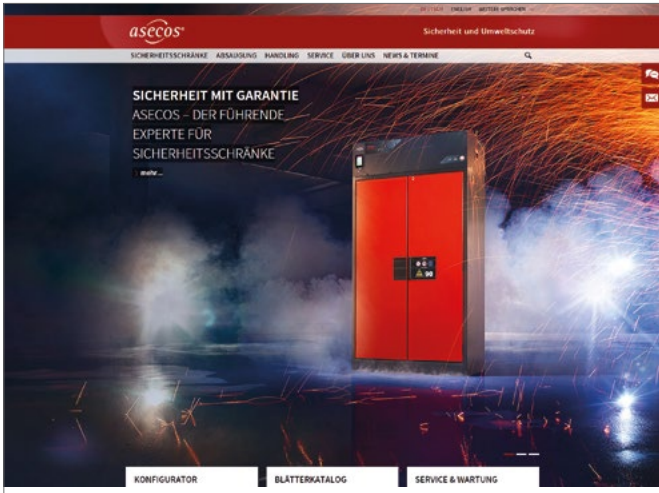

asecos webbsida

Besök den flerspråkig asecos webbsidan **www.asecos.com**. Vi uppdaterar vår hemsida frekvent med de senaste händelserna, produktinnovationerna, katalogerna och information om farligt gods.

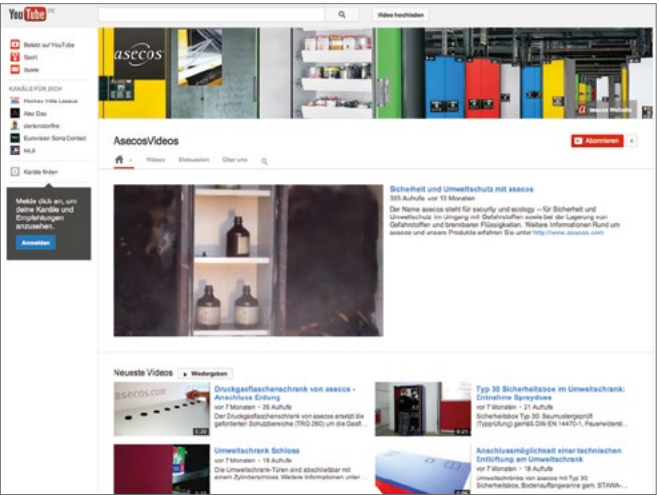

asecos YouTube kanal

På vår YouTube kanal hittar du ett växande antal videoklipp, som visar grundegenskaperna av våra proukter: **www.youtube.com/asecoschannel**



Excellence4Lab


Excellence4Lab är ett medarbete med fyra självständiga företag, alla ledande tillverkare inom ett särskilt område i labben. Som aktivt involverad i internationella arbetsgrupper, utvecklar Excellence4Lab innovativa och hållbara lösningar tillsammans med konsumenterna, för ta itu med dagens utmaningar i laboratorier. **www.excellence4lab.com**

asecos PRINT

Det kan hända för vem som helst - många olika faror hotar då man hanterar farliga ämnen!

Användning av farliga och brännbara ämnen på laboratorier och industrier är en oundvikligt del av en daglig rutin. Vad som ofta glöms bort är den dagliga hanteringen samt opas-sande lagring av sådana ämnen som sätter människor, miljö och egendom i fara.

Lär dig mer av säker lagring av farliga ämnen i vår **"Farligt Gods Guide"**. Du kan beställa den på vår webbsida: www.asecos.com/catalogues

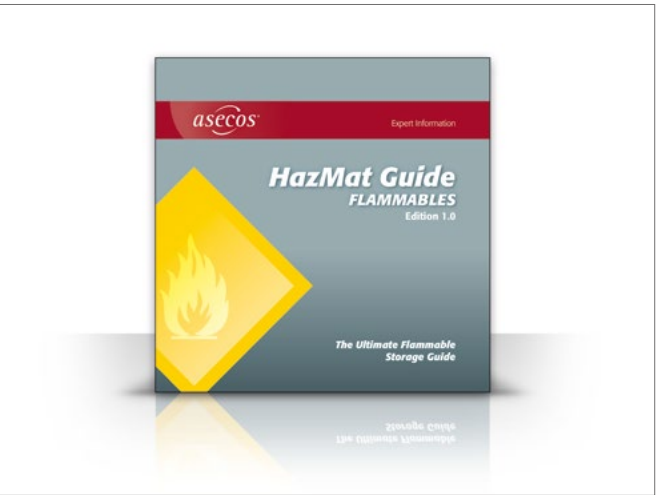

asecos Print Service

Varje år producerar vi en variation specialiserade broschyrer och kataloger i flera olika språk, för olika tillämpningar och målgrupper.




asecos konfigurator

Med vår produkt konfigurator kan du planera din egen säkerhetsskåp, inklusive inre utrustning, dimensioner och designs. Till slut får du en visualisering av den planerade produkten och du kan be om en offert.

<http://www.asecos-configurator.com>



presenterat av

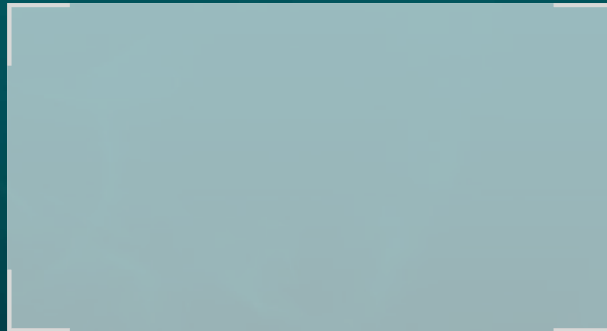

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 0AT

Phone +44 (0) 7880 435 436
Fax +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos Sarl

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 172 50 64 76
Fax +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8,
Despachos 1 y 2
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (España)

Phone +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
info@asecos.es